

# Vital Signs Monitor 300 Series

---



---

## Istruzioni per l'uso

La versione software 1.2X

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

© 2012 Welch Allyn. Tutti i diritti riservati. Come ausilio e sostegno all'uso previsto del prodotto descritto in questo documento, l'acquirente del prodotto è autorizzato a copiare questa pubblicazione, solo ai fini di una distribuzione interna, dai supporti forniti da Welch Allyn. È vietato qualsiasi altro impiego, riproduzione o distribuzione di questa pubblicazione, o di parte di essa, senza il previo permesso scritto di Welch Allyn. Welch Allyn non si assume alcuna responsabilità per danni alle persone o per uso illegale o improprio del prodotto derivanti da un utilizzo non conforme alle istruzioni, ai messaggi di attenzione, agli avvertimenti o alle dichiarazioni di uso previsto pubblicate nel presente manuale.

Welch Allyn è un marchio registrato di Welch Allyn.

SET e Masimo sono marchi registrati di Masimo Corporation. Il possesso o l'acquisto del monitor dotato di dispositivi Masimo SpO<sub>2</sub> non attribuisce alcuna licenza espressa o tacita per l'utilizzo con sensori o cavi non autorizzati che, singolarmente o in combinazione con il presente dispositivo, rientrerebbero nell'ambito di competenza di uno o più brevetti tra quelli relativi a questo dispositivo.

Il software incluso in questo Prodotto è soggetto al copyright di Welch Allyn o dei suoi fornitori. Tutti i diritti sono riservati. Il software è protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti d'America e dalle disposizioni dei trattati internazionali applicabili. Nel rispetto di tali leggi, il titolare della licenza è autorizzato ad utilizzare copia del software incorporato in questo strumento secondo le modalità previste per il funzionamento del prodotto in cui è integrato, ma tale software non può essere copiato, decompilato, retroanalizzato, disassemblato o ridotto in qualunque altro modo in forma umanamente percepibile. Il software o copie del software non sono in vendita; tutti i diritti, titoli e proprietà del software appartengono a Welch Allyn o ai suoi fornitori.

Per informazioni sui prodotti Welch Allyn, contattare l'assistenza tecnica Welch Allyn:

USA	+ 1 315 685 4560 800 535 6663	Australia	+ 61 2 9638 3000
Canada	800 561 8797	Cina	+ 86 216 327 9631
Call Center europeo	+ 35 3 46 906 7790	Francia	+ 33 1 55 69 58 49
Germania	+ 49 7477 92 71 86	Giappone	+81 42 703 6084
America Latina	+ 1 305 669 9003	Olanda	+ 31 202 061 360
Singapore	+ 65 6419 8100	Sud Africa	+ 27 11 777 7555
Regno Unito	+ 44 20 7365 6780	Svezia	+ 46 8 58 53 65 51

#### **REF 810-2250-XX**

Codice manuale: 810-2269-05 Ver A, 2012-07



Welch Allyn, Inc.  
8500 SW Creekside Place  
Beaverton, OR 97008-7107 USA



Rappresentante Affari regolatori  
Welch Allyn Limited  
Navan Business Park  
Dublin Road, Navan  
County Meath, Republic of Ireland

[www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)

# Indice analitico

---

<b>1 - Informazioni generali</b>	<b>1</b>
Guida al manuale	1
Destinazione d'uso	1
Simboli	2
Descrizione generale del prodotto	4
Avvertenze e precauzioni	5
Visualizzazioni, indicatori, comandi e collegamenti	7
<b>2 - Impostazione</b>	<b>11</b>
Collegamenti	11
Accensione, test automatico all'avvio e spegnimento	17
Configurazione dei parametri di funzionamento	19
<b>3 - Monitoraggio del paziente</b>	<b>31</b>
Monitoraggio della pressione sanguigna	31
Monitoraggio della frequenza del polso	39
Monitoraggio dell'SpO <sub>2</sub>	40
Monitoraggio della temperatura	43
<b>4 - Allarmi e anomalie</b>	<b>55</b>
Risposta ad un allarme paziente	55
Risposta a un'anomalia tecnica	56
Indicatori di allarme	58
Impostazione degli allarmi	58
Chiamata infermiere	61
Codici guasto	62
<b>5 - Esame dei dati del paziente</b>	<b>63</b>
Visualizzazione dei dati memorizzati del paziente	63
Stampa dei dati del paziente	63
Cancellazione dei dati del paziente	69
Sostituzione della carta della stampante	70
<b>6 - Manutenzione operatore</b>	<b>71</b>
Pulizia	71
Conservazione	71
Riutilizzo	72

<b>7 - Riferimento</b> .....	<b>73</b>
Funzionamento a batteria .....	73
Specifiche del monitor .....	75
Impostazioni predefinite in fabbrica .....	84
 <b>Garanzia</b> .....	 <b>85</b>
 <b>Indice analitico</b> .....	 <b>87</b>

# 1

## Informazioni generali

### Guida al manuale

Questo manuale contiene informazioni relative al monitor dei segni vitali Welch Allyn Monitor Vital Signs Monitor 300 Series. La serie comprende i modelli descritti di seguito.

Modello	Caratteristiche	Modello	Caratteristiche
<b>53000</b>	Standard (NIBP, frequenza del polso e PAM)	<b>53S00</b>	Standard + SpO <sub>2</sub> Masimo
<b>5300P</b>	Standard + Stampante	<b>53ST0</b>	Standard + SpO <sub>2</sub> Masimo + Temperatura
<b>530T0</b>	Standard + Temperatura	<b>53S0P</b>	Standard + SpO <sub>2</sub> Masimo + Stampante
<b>530TP</b>	Standard + Temperatura + Stampante	<b>53STP</b>	Standard + SpO <sub>2</sub> Masimo + Temperatura + Stampante

Prima di utilizzare il monitor, tutti gli operatori devono leggere e comprendere appieno questo manuale.

Tutti i tecnici ed altro personale qualificato devono leggere e comprendere appieno questo manuale prima di tentare di impostare, configurare, risolvere i problemi o intervenire sul monitor.

Tutte le informazioni contenute in questo manuale, figure comprese, si basano su un monitor che consente di monitorare la temperatura, l'SpO<sub>2</sub> e dotato di opzioni di stampa. Qualora una di queste opzioni risultasse mancante nella configurazione del monitor in uso, alcune informazioni di questo manuale non saranno valide.

### Destinazione d'uso













I monitor serie VSM sono progettati per essere utilizzati da medici o personale qualificato per il monitoraggio non invasivo della pressione sanguigna, della frequenza del polso, della temperatura corporea e della percentuale di saturazione di ossigeno dell'emoglobina del sangue arterioso (SpO<sub>2</sub>) in pazienti adulti, pediatrici e neonati.

I pazienti monitorati sono normalmente ricoverati nelle seguenti strutture: reparti di medicina generale/chirurgia, strutture ospedaliere e istituti di medicina alternativa. Questo dispositivo può essere venduto esclusivamente dietro prescrizione di personale medico-sanitario autorizzato.




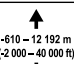



# Simboli

Nelle pagine seguenti sono raffigurati i simboli visualizzati sul monitor e utilizzati nel presente manuale.



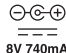


**Tabella 1. Simboli: Etichette di certificazione, di funzionamento e di documentazione**

	Il dispositivo è stato collaudato ed è certificato dall'organizzazione Canadian Standards Association International come conforme agli standard medici di sicurezza statunitensi e canadesi applicabili.		Notifica di allarme urgente (uscita per il sistema Chiamata infermiere)
	La marcatura CE e il numero di registrazione dell'organismo notificato indicano che il dispositivo soddisfa tutti i requisiti essenziali previsti dalla Direttiva europea sui dispositivi medici 93/42/CEE.		Riciclare le batterie usate in modo appropriato e in conformità alle normative nazionali. Provvedere al loro smaltimento in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari.
	Non smaltire questo prodotto con i normali rifiuti. ("Riutilizzo" a pagina 72.)		
	Importatore registrato in Australia		Batteria al piombo sigillata 6V 4Ah
	I collegamenti (temperatura/PSNI) al paziente sono di tipo BF e protetti da defibrillazione.		I collegamenti (SpO <sub>2</sub> ) al paziente sono di tipo BF.
	<b>Avvertenza</b> Indica condizioni che potrebbero causare lesioni personali o morte.		
	<b>Attenzione</b> In questo manuale, indica condizioni che potrebbero danneggiare il sistema o altre apparecchiature.		
	<b>Attenzione</b> Sul prodotto significa "Consultare la documentazione allegata".		

**Tabella 2. Simboli: Etichette riguardanti la spedizione, la conservazione e l'ambiente**

	Tenere questa estremità della confezione o della gabbia di spedizione rivolta verso l'alto.		Tenere il monitor al riparo dalla pioggia.
	Contenuto fragile, maneggiare con cura.		Non utilizzare il monitor ad altitudini al di fuori di questi limiti.
	Non esporre il monitor ad un'umidità relativa superiore a questo limite.		Limitare la sovrapposizione a questo numero di unità.
	Non esporre il monitor a temperature al di fuori di questi limiti.		

**Tabella 3. Simboli: Etichette del connettore**











	Connettore del cavo della sonda di temperatura	<b>SpO2</b>	Connettore del cavo del sensore dell'SpO <sub>2</sub>
	Connettore del cavo RS232		Connettore del cavo dell'alimentatore c.a.
	Connettore del cavo per la chiamata infermiere		Connettore del tubo flessibile NIBP

**Tabella 4. Simboli: Etichette dello sportello della stampante**











	Premere per aprire lo sportello della stampante		Caricare la carta in questa direzione
---	---	---	---------------------------------------

I comandi presenti sul pannello frontale del monitor sono descritti in modo più dettagliato nel resto del manuale.

**Tabella 5. Comandi del pannello frontale**

	Impostazione dei limiti di allarme		Accensione/spengimento dell'alimentazione
	Tacitazione allarmi		Stampa dei dati del paziente
	Scorrimento su/giù Scorrimento in avanti/indietro Aumento/diminuzione del valore		Esame dei dati del paziente
	(Nella documentazione l'icona di scorrimento viene rappresentata dalle due frecce raffigurate a lato.)		
	Impostazione di un intervallo di misurazione automatica per l'NIBP		Avvio/interruzione di un ciclo NIBP (Pulsante AUTO)
	Passaggio alle successive selezioni del menu		

**Tabella 6. Visualizzazioni ed indicatori del pannello frontale**

<b>SYS</b>	Pressione sistolica		Temperatura
<b>DIA</b>	Pressione diastolica		
<b>SpO2</b>	Saturazione di ossigeno dell'emoglobina arteriosa		
 /min	Frequenza del polso	indicatore dell'ampiezza della pulsazione	Intensità della pulsazione
finestra messaggi	PAM (pressione arteriosa media)		Paziente neonatale
	Gradi Celsius		Paziente pediatrico
	Gradi Fahrenheit		Paziente adulto
	Temperatura monitorata		Alimentazione in c.a. Carica della batteria in corso (lampeggiante) Batteria carica (fisso)
	Batteria scarica		

## Descrizione generale del prodotto

Il monitor è in grado di monitorare la pressione sanguigna non invasiva (NIBP) sistolica e diastolica, la frequenza del polso e la PAM (pressione arteriosa media). Inoltre, le unità configurate con le opzioni appropriate possono monitorare contemporaneamente la temperatura e l'SpO<sub>2</sub>, pur continuando il monitoraggio della frequenza del polso.

Tutte le misurazioni dei segni vitali sono visualizzate sul pannello frontale del monitor. Utilizzando la stampante termica integrata opzionale, è altresì possibile stampare tali misurazioni.

Il monitor fornisce allarmi acustici e visivi programmabili e misurazioni NIBP automatiche ad intervalli selezionabili. Si può anche configurare per la funzione di chiamata infermiere attivata da allarme.

Tutti gli accessori collegati alle interfacce analogiche e digitali devono essere certificati in base ai rispettivi standard IEC (EN 60950 per le apparecchiature di elaborazione dati e EN 60601-1 per le apparecchiature mediche). Tutte queste configurazioni devono essere conformi allo standard di sistema IEC 60601-1-1.



**Attenzione** Chiunque colleghi apparecchiature aggiuntive ai connettori dei segnali in entrata e in uscita **configura un sistema medico ed è pertanto responsabile della conformità del sistema ai requisiti dello standard di sistema 60601-1-1**. Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati da Welch Allyn possono rendere nulla l'autorizzazione all'uso del dispositivo da parte dell'acquirente.



# Avvertenze e precauzioni

Tutti gli operatori e tecnici di assistenza devono conoscere bene le informazioni descritte nelle presente sezione e le altre avvertenze e precauzioni riportate nel manuale.

Le etichette di avvertenza e precauzione illustrate, a partire dalla “Simboli” a pagina 2, possono apparire sul monitor, sulla confezione, sull'imballaggio di spedizione o in questo documento.

## Avvertenze



**AVVERTENZA** Diverse variabili, incluse la fisiologia del paziente e l'applicazione clinica, possono incidere sull'accuratezza e sulle prestazioni del monitor. Prima di qualsiasi intervento sul paziente, il medico deve verificare tutte le informazioni sui suoi segni vitali.

**AVVERTENZA** Il monitor è destinato esclusivamente all'utilizzo da parte di personale medico. Sebbene questo documento possa illustrare tecniche di monitoraggio medico, solo i medici esperti nella raccolta e interpretazione dei segni vitali del paziente possono utilizzare il monitor.

**AVVERTENZA** Utilizzare soltanto con accessori approvati da Welch Allyn. Visitare il sito Web [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com). L'utilizzo di accessori diversi può generare dati del paziente non accurati, causare danni all'apparecchiatura e comportare l'annullamento della garanzia del prodotto.

**AVVERTENZA** Non utilizzare il monitor in presenza di apparecchiature per risonanza magnetica nucleare (RMI) o camere iperbariche.

**AVVERTENZA** Non utilizzare il monitor in presenza di anestetici infiammabili combinati con aria, ossigeno o protossido di azoto, né in ambienti ricchi di ossigeno o in qualsiasi altro ambiente potenzialmente esplosivo.

**AVVERTENZA** Spetta al medico definire o verificare i limiti di allarme appropriati per ciascun paziente.

**AVVERTENZA** Non far entrare in contatto i connettori del monitor con liquidi. Se ciò si verifica, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Disattivare il monitor.
2. Utilizzare aria calda e secca per asciugare il connettore.
3. Provare e verificare accuratamente il funzionamento dell'apparecchiatura prima di rimetterla in servizio.

**AVVERTENZA** Nel corso della defibrillazione, tenere le piastre di scarica lontane da qualsiasi parte conduttiva che possa già essere a contatto con il paziente.



**AVVERTENZA** Non collegare più di un paziente a un monitor.

**AVVERTENZA** Se si fa cadere o si danneggia il monitor, è necessario che un tecnico qualificato lo verifichi accuratamente prima di rimetterlo in servizio.

**AVVERTENZA** Controllare periodicamente tutti i fili e i cavi per assicurarsi che non siano danneggiati, rotti o consumati; all'occorrenza, sostituirli.

**AVVERTENZA** Il monitor non contiene parti riparabili dall'utilizzatore, eccetto il rotolo di carta sostituibile.

**AVVERTENZA** Se la batteria presenta segni di danno, perdita o rottura, occorre farla sostituire immediatamente da un tecnico qualificato e con una batteria approvata da Welch Allyn.

**AVVERTENZA** Riciclare sempre le batterie, e in conformità alle normative nazionali. Provvedere al loro smaltimento in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari.

**AVVERTENZA** Non utilizzare il monitor in pazienti collegati ad una macchina destinata all'attività cardiaca o polmonare.

**AVVERTENZA** Non utilizzare il monitor in pazienti con convulsioni o tremori.

**AVVERTENZA** Non utilizzare il pulsossimetro in sostituzione dell'analisi dell'aritmia basata su ECG.

## Precauzioni generali



**Attenzione** In caso di dubbi in relazione all'accuratezza di ogni misurazione, verificare il segno vitale del paziente con un altro metodo. Se il monitor non effettua la misurazione in modo accurato, far eseguire un controllo da un tecnico qualificato.

**Attenzione** Assicurarsi che il monitor sia posizionato saldamente su una superficie piana o che sia sospeso in modo opportuno mediante i dispositivi appropriati di montaggio.

**Attenzione** Non sterilizzare il monitor in autoclave.

**Attenzione** Non appoggiare tazze, bicchieri o altri contenitori di liquidi o vasi sul monitor.

**Attenzione** Gli utenti devono controllare la funzione di allarme acustico a ogni utilizzo di VSM 300. Durante il normale ciclo di accensione, subito dopo il completamento dell'autotest vengono emessi due segnali acustici. Se ciò non si verifica, l'audio non funziona correttamente. Rimuovere il dispositivo dal servizio e contattare Welch Allyn.

In caso di mancata emissione dell'allarme acustico, il medico potrebbe accorgersi in ritardo di una situazione di allarme legata alle seguenti condizioni: 1) ipotensione o ipertensione, 2) basso livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO<sub>2</sub>), 3) frequenza cardiaca bassa o alta, 4) altre condizioni di allarme derivanti dal mancato monitoraggio del paziente (ad esempio, in caso di disattivazione del sensore). Tale ritardo può essere causa di lesioni al paziente.

# Visualizzazioni, indicatori, comandi e collegamenti

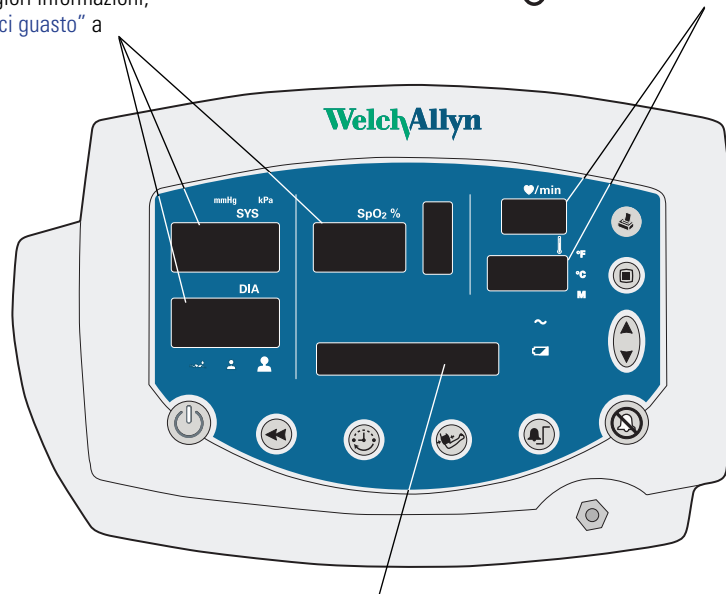
Questa sezione descrive le visualizzazioni delle misurazioni, gli indicatori di stato, i comandi relativi al funzionamento e i collegamenti del monitor.

## Visualizzazioni della misurazione numerica e dei messaggi

### SIS, DIA e SpO<sub>2</sub>.

Visualizza la pressione sanguigna sistolica e diastolica e l'SpO<sub>2</sub> o le relative soglie di allarme e i codici di errore. (Per maggiori informazioni, consultare "Codici guasto" a pagina 62.)


Visualizza la frequenza del polso e la temperatura o le relative soglie di allarme e i codici di errore.




(Finestra messaggi)

Visualizza la data e l'ora attuali, le misurazioni PAM e le soglie di allarme. Visualizza le impostazioni relative alla configurazione, i codici di errore, la versione software e lo stato della stampante.


## Indicatori di stato

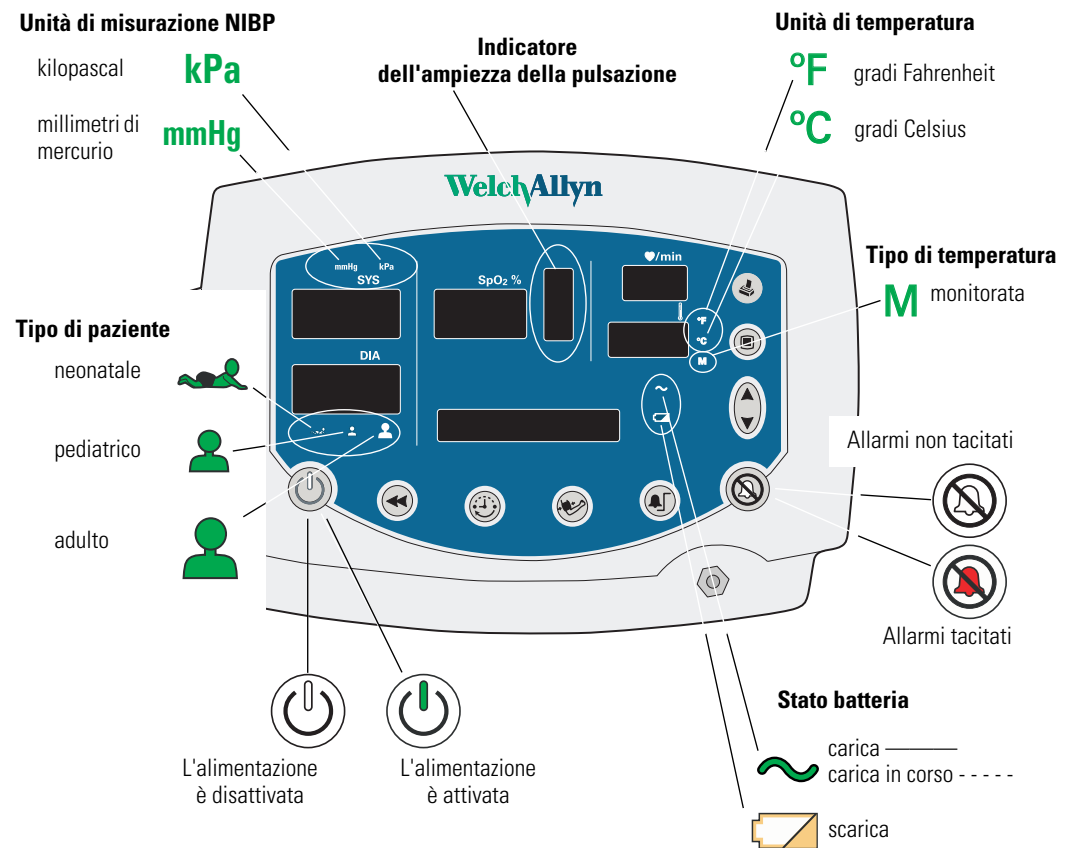

## Comandi per il funzionamento

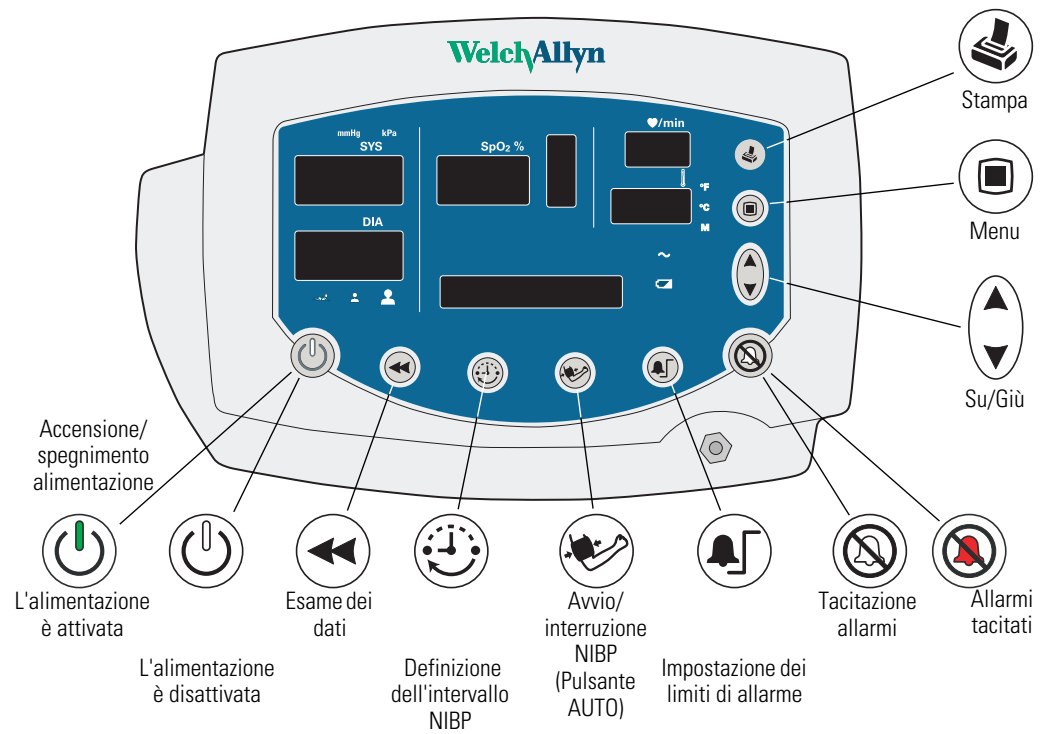

## Collegamenti

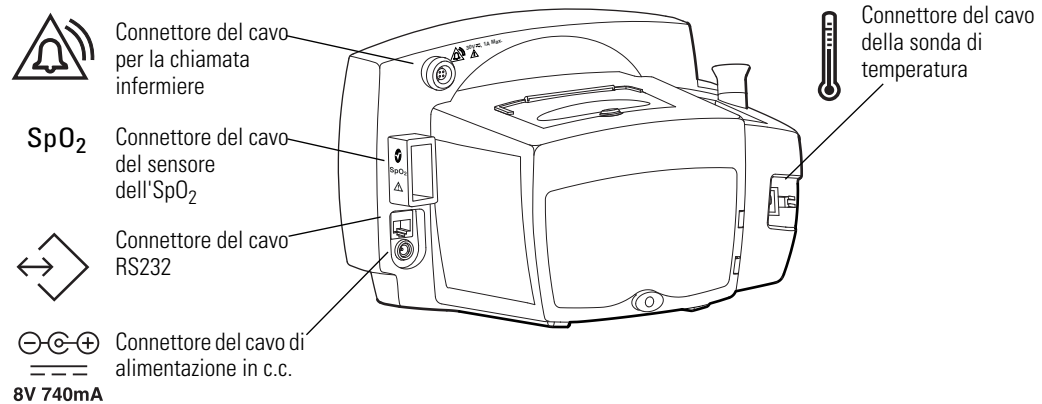

Per informazioni sui collegamenti, consultare quanto descritto di seguito.

<b>Alimentatore c.a.</b>	<a href="#">"Collegamento dell'alimentazione in c.a." a pagina 11</a>
<b>Sonda di temperatura</b>	<a href="#">"Collegamento del cavo della sonda di temperatura" a pagina 14</a>
<b>Sensore <math>\text{SpO}_2</math></b>	<a href="#">"Collegamento e scollegamento del cavo sensore dell'<math>\text{SpO}_2</math>" a pagina 15</a>
<b>Tubo flessibile del bracciale NIBP</b>	<a href="#">"Collegamento del tubo flessibile del bracciale NIBP" a pagina 13</a>
<b>Cavo di chiamata infermiere</b>	<a href="#">"Specifiche di chiamata infermiere" a pagina 83</a>

## 2

## Impostazione

---

Questo capitolo descrive le procedure di impostazione per il monitoraggio del paziente.

### Collegamenti

Fare uso delle procedure descritte sotto per il collegamento dei componenti al monitor.

#### Collegamento dell'alimentazione in c.a.

Il monitor funziona con alimentazione in corrente continua, erogata dalla batteria interna o dall'alimentatore c.a. (Per informazioni sulla batteria, consultare “[Funzionamento a batteria](#)” a pagina 73 e “[Specifiche elettriche](#)” a pagina 78.)

Quando è collegato, l'alimentatore c.a. fornisce energia al monitor e carica la batteria interna. Se l'alimentatore c.a. non è collegato, il monitor funziona con la batteria interna.



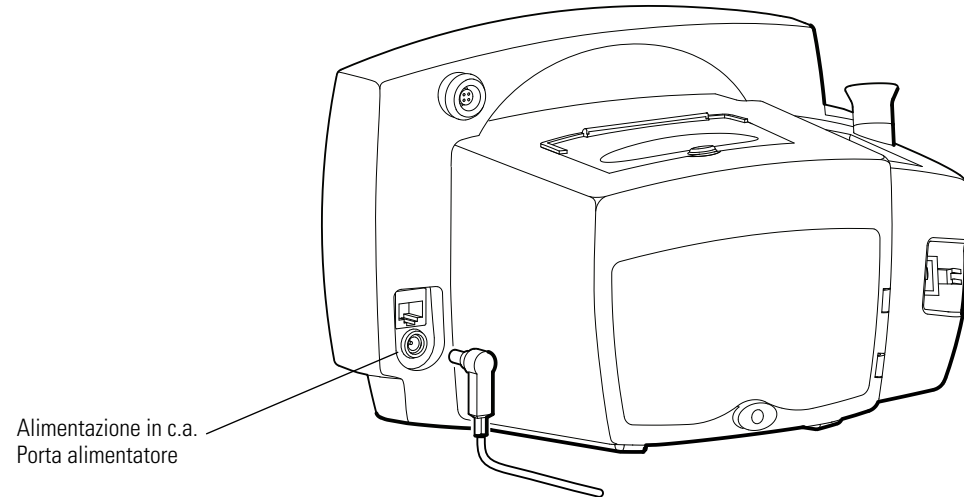
**AVVERTENZA** Utilizzare soltanto con accessori approvati da Welch Allyn. Visitare il sito Web [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com). L'utilizzo di accessori diversi può generare dati del paziente non accurati, causare danni all'apparecchiatura e comportare l'annullamento della garanzia del prodotto.



**Attenzione** L'uso di un adattatore di alimentazione non adeguato può violare i requisiti di isolamento.

Per utilizzare l'alimentatore c.a., attenersi ai passi indicati.

1. Collegare l'alimentatore alla sorgente di alimentazione c.a.
2. Collegare il connettore dell'alimentatore alla porta c.c. del monitor.



Utilizzare l'alimentatore c.a. per caricare completamente la batteria prima di utilizzare il monitor. (Per tale operazione è possibile che occorranza fino a 12 ore.)



**Attenzione** Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il monitor per la prima volta. La mancata osservanza di questa operazione inficerà le prestazioni della batteria riducendone la durata.


- Durante la carica del monitor, l'indicatore di c.a./in carica ~ lampeggia.
- Quando il monitor è carico al 90%, l'indicatore di c.a./in carica ~ è fisso. Per caricare completamente la batteria, lasciare l'alimentatore c.a. collegato ancora per qualche ora.
- Dopo la prima carica completa del monitor, è possibile alimentarlo mediante alimentatore c.a. o batteria interna.



## Collegamento del tubo flessibile del bracciale NIBP

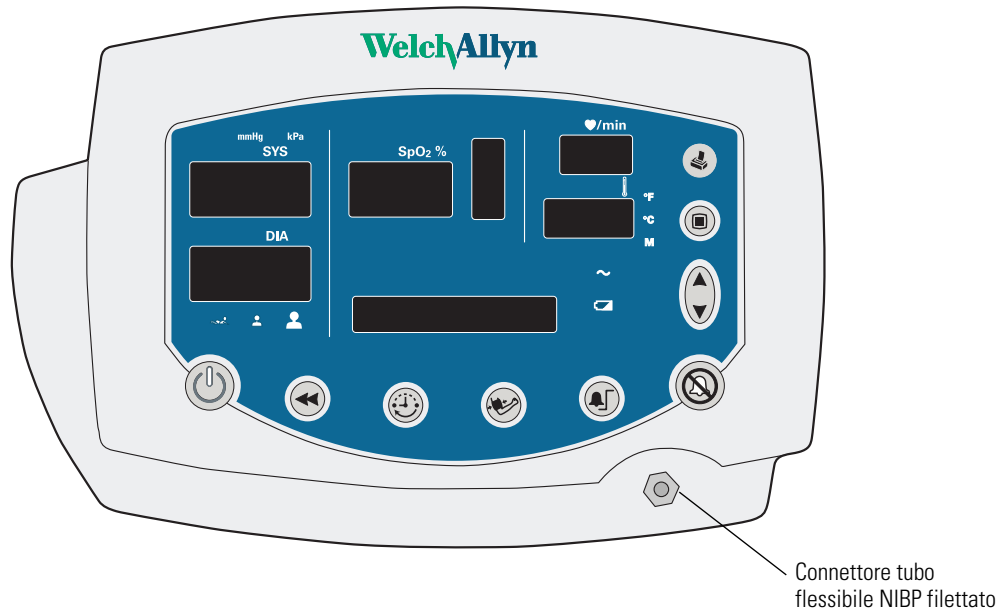Fissare il tubo flessibile al monitor e il bracciale come descritto di seguito, facendo riferimento alla figura riportata.


1. Avvitare il connettore del tubo flessibile al connettore NIBP del monitor.
2. Collegare il connettore del tubo flessibile del monitor al connettore corrispondente del bracciale.




Per ulteriori informazioni sulle misurazioni NIBP, consultare ["Monitoraggio del paziente"](#) a pagina 31.

## Collegamento del cavo della sonda di temperatura

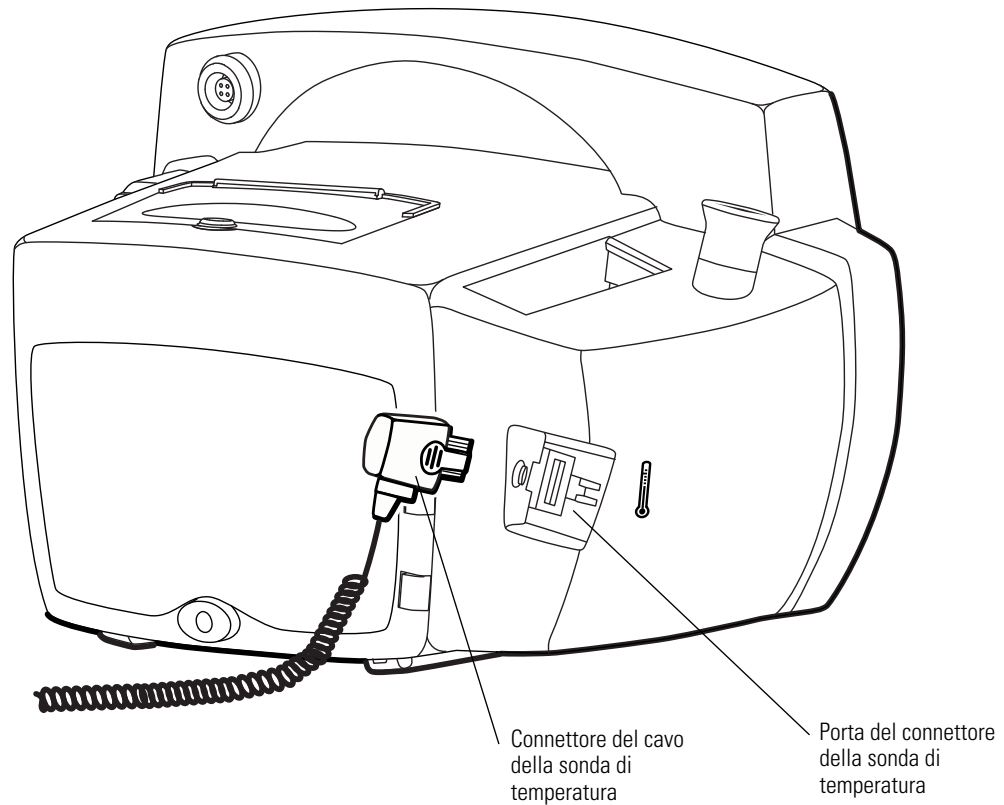Attenersi ai passi descritti per collegare il cavo della sonda di temperatura al monitor.


1. Individuare la porta del connettore della sonda di temperatura  sul retro del monitor.
2. Tenendo il connettore del cavo della sonda di temperatura con aletta elastica sulla destra, inserirlo con cura nell'apposita porta del monitor. L'aletta elastica si incastra quando le metà del connettore combaciano in modo completo e corretto.
3. Per scollegare il cavo della sonda di temperatura, fare pressione sull'aletta elastica e rimuovere il connettore del cavo.



Per ulteriori informazioni sulle misurazioni della temperatura, consultare [“Monitoraggio del paziente”](#) a pagina 31.

## Collegamento e scollegamento del cavo sensore dell'SpO<sub>2</sub>

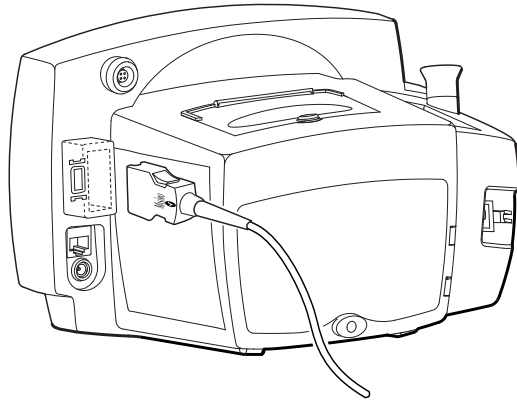1. Individuare il connettore del cavo sensore dell'SpO<sub>2</sub> (marcato **SpO2**) sul fianco del monitor.
2. Osservare la posizione dei fori delle metà dei connettori, e far combaciare di conseguenza il connettore del cavo.
3. Inserire con cura il connettore del cavo dell'SpO<sub>2</sub> nel relativo connettore SpO<sub>2</sub> del monitor.




In caso di utilizzo di una prolunga per il sensore, collegare il sensore alla prolunga e quindi collegare la prolunga al monitor.

Per scollegare il cavo SpO<sub>2</sub> attenersi alla procedura qui descritta, afferrare il connettore del cavo come illustrato.

**Nota** Rimuovere il connettore del cavo dalla relativa porta. Non tirare direttamente il cavo.

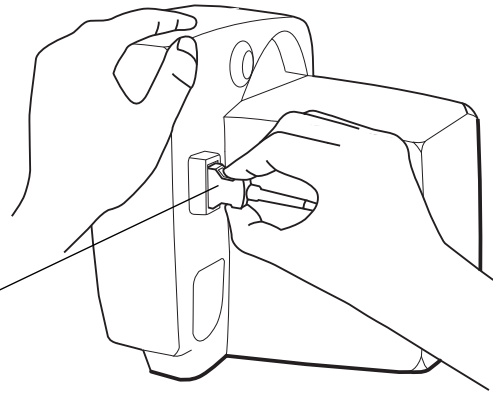Il pollice e l'indice comprimono le linguette sulla spalla del paziente per il rilascio del cavo connettore.



Per informazioni sulle misurazioni dell'SpO<sub>2</sub>, consultare [“Monitoraggio del paziente”](#) a pagina 31.

## Accensione, test automatico all'avvio e spegnimento

Quando la batteria è carica, premere  per accendere il monitor.

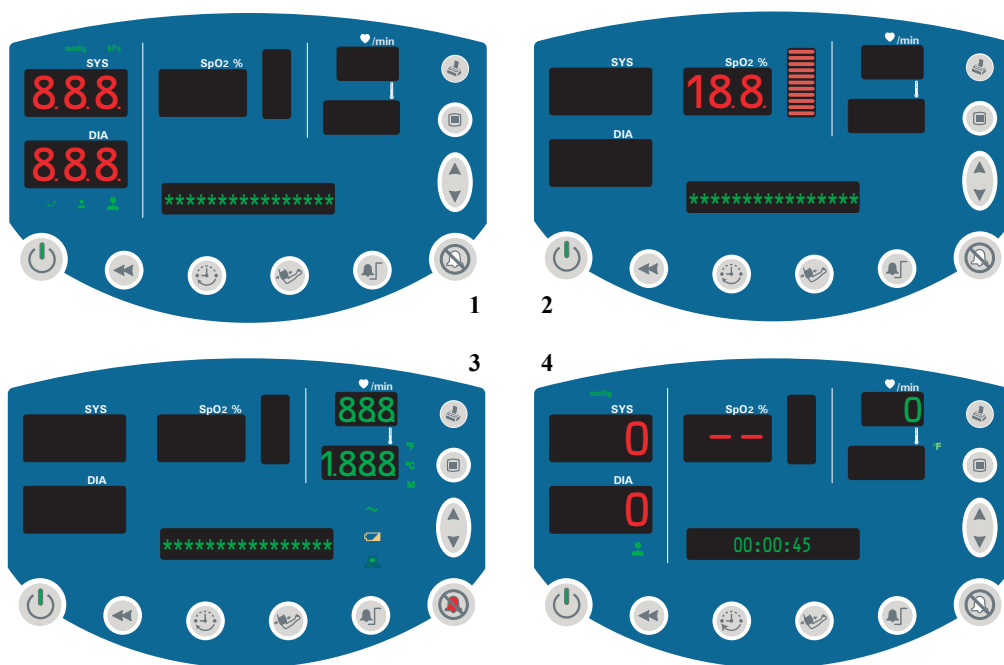
Il monitor esegue un test automatico di diagnostica ad ogni accensione.

- Se le operazioni delle funzioni riescono normalmente, le varie finestre visualizzano rapidamente i valori di inizio ("8" e "-") e viene riprodotto per due volte un breve segnale acustico.



**Attenzione** Gli utenti devono controllare la funzione di allarme acustico a ogni utilizzo di VSM 300. Durante il normale ciclo di accensione, subito dopo il completamento dell'autotest vengono emessi due segnali acustici. Se ciò non si verifica, l'audio non funziona correttamente. Rimuovere il dispositivo dal servizio e contattare Welch Allyn.

In caso di mancata emissione dell'allarme acustico, il medico potrebbe accorgersi in ritardo di una situazione di allarme legata alle seguenti condizioni: 1) ipotensione o ipertensione, 2) basso livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO<sub>2</sub>), 3) frequenza cardiaca bassa o alta, 4) altre condizioni di allarme derivanti dal mancato monitoraggio del paziente (ad esempio, in caso di disattivazione del sensore). Tale ritardo può essere causa di lesioni al paziente.




- Se il test automatico all'avvio non riesce, appare un codice di guasto nella finestra SIS.

Al termine del test automatico, appare rapidamente la versione del software nella finestra dei messaggi, seguita dalla data e dall'ora.



**Attenzione** Osservare sempre il monitor durante l'accensione. Se una delle visualizzazioni non si illumina in modo appropriato o se appare un codice di guasto nella finestra sistolica, informare immediatamente il reparto di ingegneria biomedica oppure contattare l'assistenza tecnica o il supporto tecnico Welch Allyn più vicino. Non usare il monitor fino alla risoluzione del problema.

Per spegnere il monitor, premere .

**Nota** Lo spegnimento del monitor comporta la cancellazione di tutti i dati memorizzati del paziente, tuttavia non cancella le impostazioni o i parametri della configurazione.


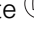
# Configurazione dei parametri di funzionamento


È possibile modificare i vari parametri di funzionamento del monitor. Quando modificate, queste impostazioni diventano le impostazioni predefinite all'avvio.

## Modalità d'uso del sistema di menu



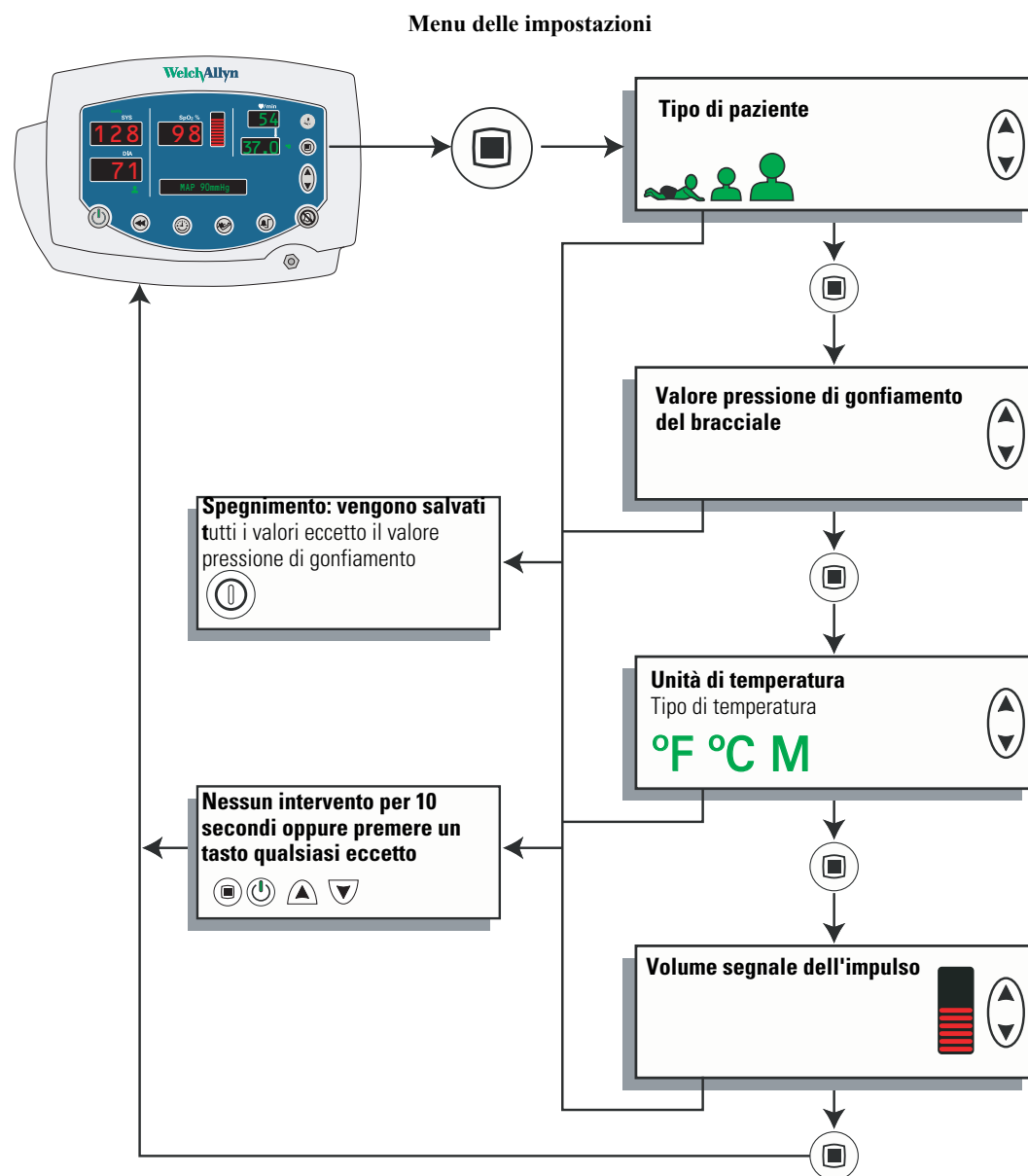
Il sistema di menu del monitor contiene tre serie di menu: impostazioni, configurazione e assistenza tecnica (servizi).

### Menu delle impostazioni







Accedere al menu delle impostazioni premendo il tasto menu  durante il normale funzionamento dell'apparecchio. Quindi premere ripetutamente  per raggiungere il parametro interessato.



Usare il menu delle impostazioni per selezionare ed impostare i parametri che seguono.

Tipo di paziente		Neonato	da nascita a termine fino a 28 giorni oppure fino a 44 settimane di gestazione
		Pediatrico	da 29 giorni a 12 anni
		Adulto	di età superiore ai 13 anni
Valore pressione			La pressione di gonfiamento iniziale del bracciale (impostata separatamente per ciascun tipo di paziente)
Mod. Temp.	°F		Fahrenheit predittiva
	°F <b>M</b>		Fahrenheit monitorata
	°C		Celsius predittiva
	°C <b>M</b>		Celsius monitorata
Volume segnale dell'impulso			Da 0 (silenzioso) a 5 (massimo)


Per modificare un parametro delle impostazioni, attenersi alla seguente procedura.

1. Selezionare il parametro come descritto in precedenza.
2. Modificare il valore premendo  o .
3. Impostare il nuovo valore visualizzato non eseguendo alcuna operazione per 10 secondi oppure premendo un tasto che non sia  o . Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, ) , il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione () attivata.



## Menu di configurazione



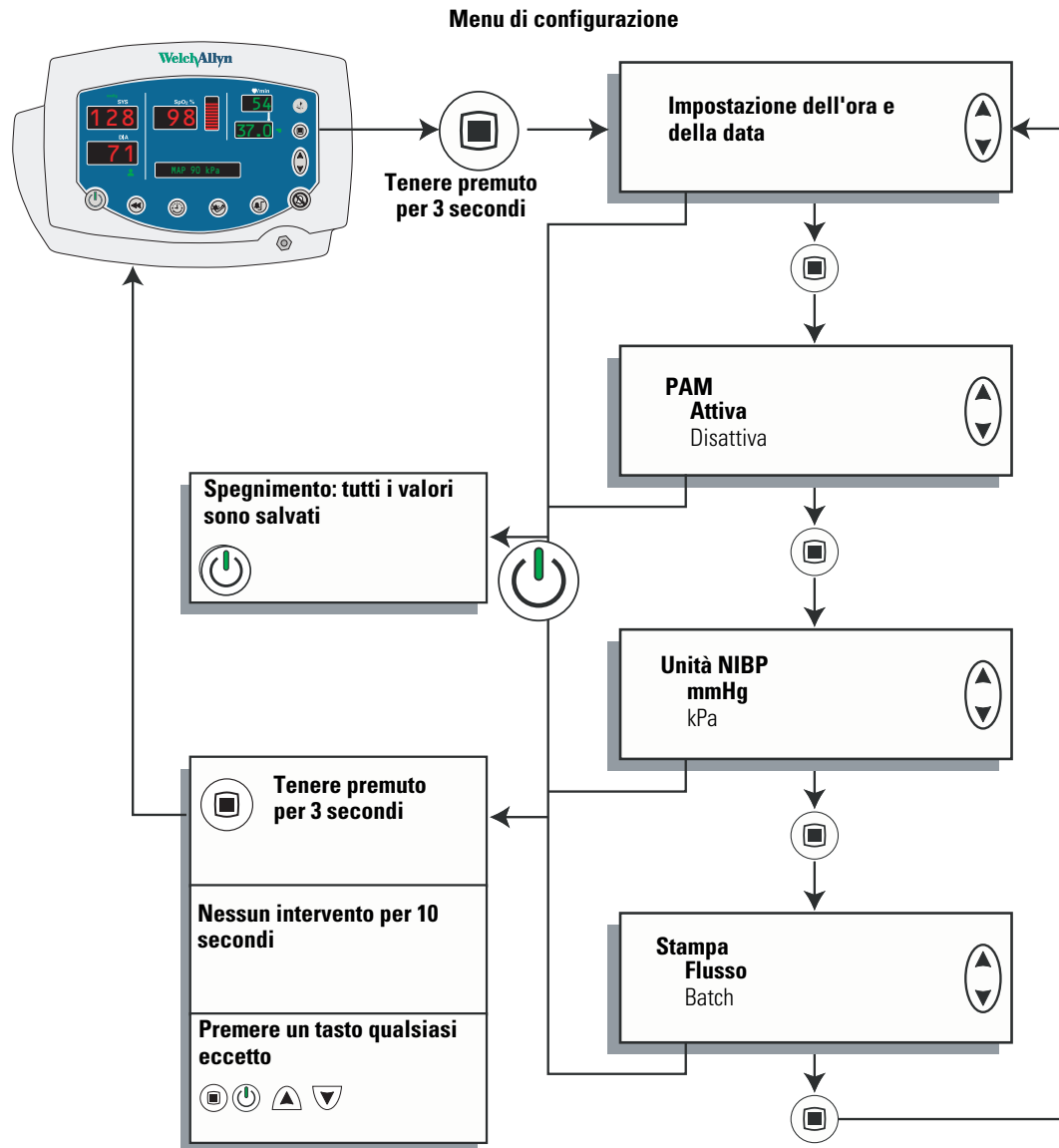



Il menu di configurazione è accessibile premendo  e tenendolo premuto per tre secondi. Quindi, premere ripetutamente  per raggiungere il parametro interessato.



Usare il menu di configurazione per selezionare ed impostare i parametri che seguono.


Tempo e data	ora minuti anno mese giorno
Misurazione PAM	Attivata Disattivata
Unità di misurazione della pressione sanguigna	mmHg (millimetri di mercurio) kPa (kilopascal)
Modalità di stampa	Batch Flusso

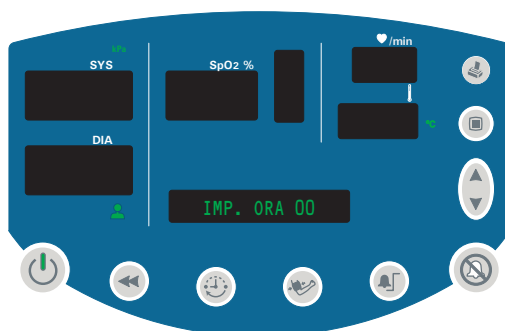
Per modificare un parametro della configurazione, attenersi alla seguente procedura.















1. Selezionare il parametro come descritto in precedenza.
2. Modificare il valore premendo  o .
3. Impostare il nuovo valore visualizzato non eseguendo alcuna operazione per 10 secondi oppure premendo un tasto che non sia  o . Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, ) , il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione () attivata.

## Modifica dell'ora e della data

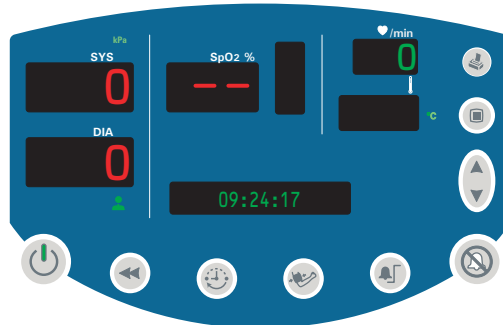
Attenersi ai passi che seguono per modificare le impostazioni dell'ora e della data dell'orologio interno del monitor.

1. Tenere premuto  per 3 secondi **IMP. ORA XX** appare nella finestra dei messaggi.

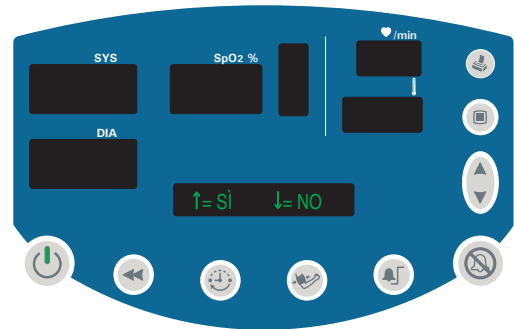
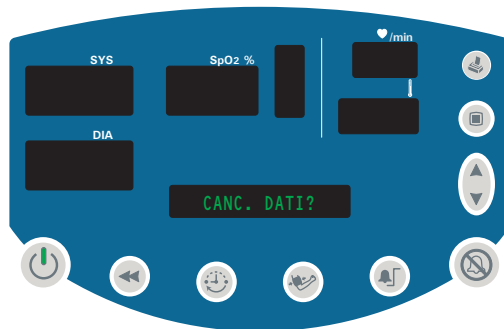


2. Premere  o  in base alle proprie esigenze per modificare XX con l'ora attuale.
3. Premere una volta  per impostare l'ora e passare alla visualizzazione di **IMP. MINUTI XX**.
4. Premere  o  in base alle proprie esigenze per modificare XX coi minuti attuali.
5. Premere una volta  per impostare i minuti e passare alla visualizzazione di **IMP. ANNO XX**.
6. Premere  o  in base alle proprie esigenze per modificare XX con l'anno attuale.
7. Premere una volta  per impostare l'anno e passare alla visualizzazione di **IMP. MESE XXX**.
8. Premere  o  in base alle proprie esigenze per modificare XXX con il mese attuale.
9. Premere una volta  per impostare il mese e passare alla visualizzazione di **IMP. GIORNO XX**.
10. Premere  o  in base alle proprie esigenze per modificare XX con il giorno attuale.

11. Per salvare le impostazioni temporali visualizzate, non eseguire alcuna operazione per 10 secondi oppure premere un tasto qualsiasi che non sia ▲ o ▼. Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, 📶), il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione (📶) attivata.






Non è possibile modificare la data e l'ora mentre la memoria contiene dei dati memorizzati relativi ai segni vitali. Se si tenta di modificare l'impostazione della data e dell'ora mentre i dati sono memorizzati, appare il messaggio **CANC. DATI?** nella relativa finestra dei messaggi. Se si conferma la cancellazione dei dati, il monitor cancella i dati dalla memoria e riporta alla funzione di impostazione della data. Se si seleziona **NO**, i dati memorizzati vengono mantenuti nella memoria e il monitor ritorna al normale funzionamento.














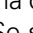

## Modifica del tipo di paziente


Di seguito viene fornita la definizione di intervallo di età per ciascun paziente:

Neonato		da nascita a termine fino a 28 giorni oppure fino a 44 settimane di gestazione
Pediatrico		da 29 giorni a 12 anni
Adulto		di età superiore ai 13 anni

Impostazione predefinita: **ADULTO**.

Attenersi alla procedura che segue per modificare l'impostazione del tipo di paziente.

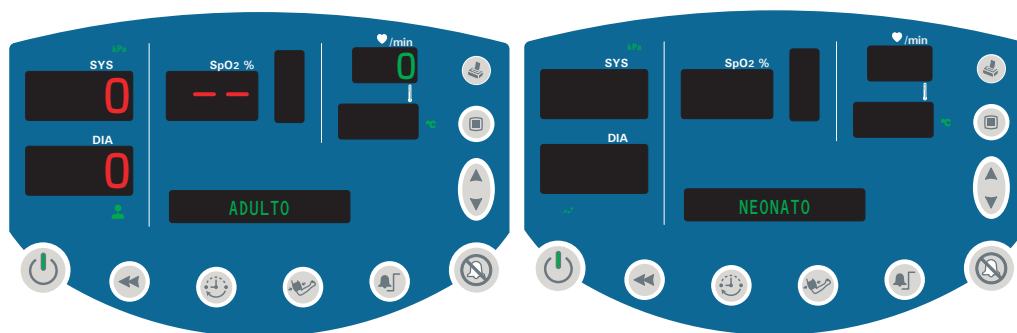1. Premere . Il tipo di paziente attuale (,  o ) appare sotto la finestra DIA, e la voce **NEONATALE**, **PEDIATRICO** o **ADULTO** appare nella finestra dei messaggi.
2. Premere  o  per visualizzare ,  o .
3. Per selezionare il tipo di paziente visualizzato e ritornare al normale funzionamento, non eseguire alcuna operazione per 10 secondi oppure premere un tasto qualsiasi che non sia  o . Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, ) il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione () attivata.





La modifica del tipo di paziente comporta gli effetti descritti di seguito.


- I limiti predefiniti di allarme vengono ripristinati per il nuovo tipo di paziente
- Il valore predefinito della pressione di gonfiamento del bracciale viene ripristinata per il nuovo paziente



Se si scorrono i tipi di paziente senza tuttavia modificare l'impostazione, le impostazioni dei limiti di allarme e il valore della pressione di gonfiamento del bracciale non cambiano.

## Attivazione e disattivazione della misurazione PAM

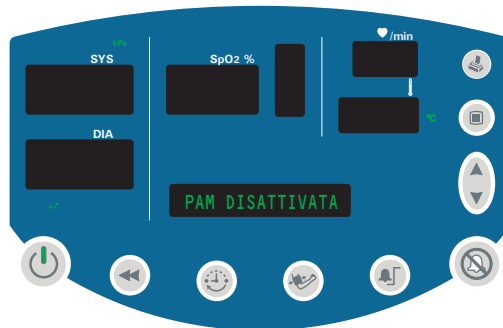
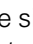


Impostazione predefinita: **PAM ATTIVATA** per pazienti neonati; **PAM DISATTIVATA** per pazienti adulti e pediatrici.

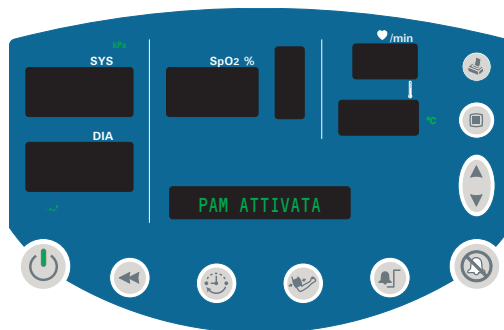
1. Premere  per 3 secondi. **IMP. ORA XX** appare nella finestra dei messaggi.
2. Premere ripetutamente  fino a visualizzare **PAM ATTIVATA** o **PAM DISATTIVATA** nella finestra dei messaggi.



3. Premere  o  per attivare o disattivare la misurazione PAM.

**Nota** Se si modifica l'impostazione di attivazione/disattivazione PAM, vedere la sezione [“Preparazione NIBP”](#) a pagina 32.

4. Per selezionare lo stato visualizzato e ritornare al normale funzionamento, non eseguire alcuna operazione per 10 secondi oppure premere un tasto qualsiasi che non sia  o . Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, ) il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione () attivata.





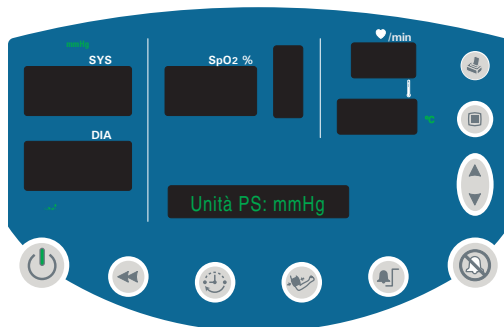
Per ulteriori informazioni sulle misurazioni PAM, consultare [“Monitoraggio del paziente”](#) a pagina 31.




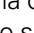


## Modifica delle unità di misurazione NIBP

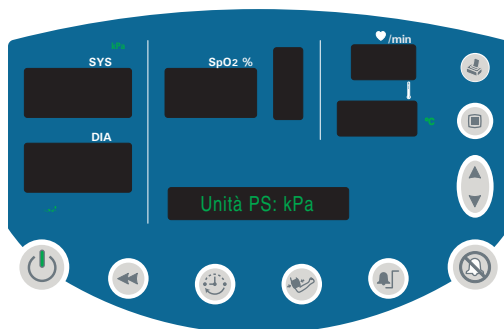
Impostazione predefinita: **mmHg**.

Per modificare le unità di misurazione NIBP, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Premere  per 3 secondi. **IMP. ORA XX** appare nella finestra dei messaggi.
2. Premere ripetutamente  fino a visualizzare **Unità PS: mmHg** o **Unità PS: kPa** nella finestra dei messaggi.



3. Premere  o  in base alle proprie esigenze per visualizzare le unità di misurazione NIBP desiderate.
4. Per selezionare le unità visualizzate e ritornare al normale funzionamento, non eseguire alcuna operazione per 10 secondi oppure premere un tasto qualsiasi che non sia  o . Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, ) il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione () attivata.




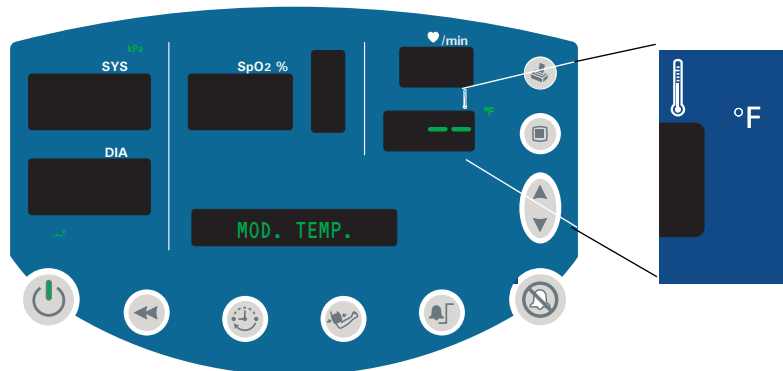
Per ulteriori informazioni sulle misurazioni NIBP, consultare [“Monitoraggio del paziente”](#) a pagina 31.



## Modifica del tipo di temperatura e delle unità di misurazione

Impostazione predefinita: **F** (Fahrenheit predittiva).

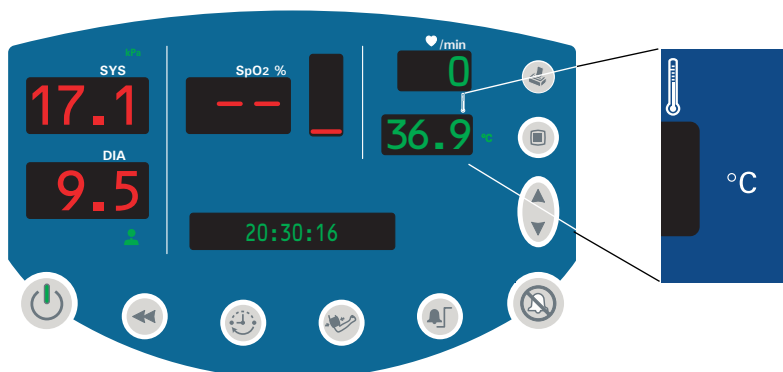
Per modificare il tipo di temperatura e le unità di misurazione della temperatura, eseguire la procedura qui descritta.


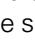
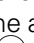
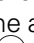
1. Con il monitor acceso, premere ripetutamente  fino a visualizzare **MOD. TEMP.** nella finestra dei messaggi. Si illuminano uno o due LED verdi sulla destra della finestra della temperatura ad indicare il tipo di temperatura selezionato.



2. Premere  o  in base alle proprie esigenze per scorrere fino alla visualizzazione desiderata.

**F** (Fahrenheit predittiva)  
**F M** (Fahrenheit monitorata)  
**C** (Celsius predittiva)  
**C M** (Celsius monitorata)



3. Per selezionare le unità visualizzate e ritornare al normale funzionamento, non eseguire alcuna operazione per 10 secondi oppure premere un tasto qualsiasi che non sia  o . Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, ) il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione () attivata.

Per ulteriori informazioni sulle misurazioni della temperatura, consultare [“Monitoraggio del paziente”](#) a pagina 31.




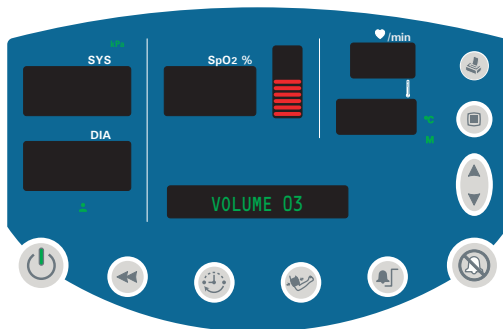
## Modifica del volume del segnale dell'impulso

Impostazione predefinita: **03**.

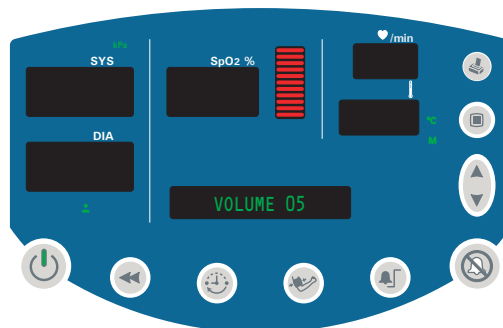
È possibile impostare il livello del segnale dell'impulso da **00** (volume spento) fino a **05** (volume al massimo).


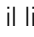

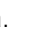
Per regolare il volume del segnale dell'impulso dell'SpO<sub>2</sub>, eseguire la seguente procedura.

1. Premere ripetutamente  fino a visualizzare **VOLUME XX** nella finestra di visualizzazione e riprodurre di continuo il segnale dell'impulso.



2. Premere  o  per aumentare o abbassare il livello del volume.



3. Per impostare il livello del volume visualizzato e ritornare al normale funzionamento, non eseguire alcuna operazione per 10 secondi oppure premere un tasto qualsiasi che non sia  o . Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, ) , il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione () attivata.

**Nota** La modifica del volume del segnale dell'impulso non ha effetto sul volume dei segnali di allarme.



**Attenzione** Gli utenti devono controllare l'emissione di segnali di impulsi acustici in caso di utilizzo della funzione SpO<sub>2</sub>. Se ciò non si verifica, l'audio non funziona correttamente.


In caso di mancata emissione dell'allarme acustico, il medico potrebbe accorgersi in ritardo di una situazione di allarme legata alle seguenti condizioni: 1) ipotensione o ipertensione, 2) basso livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO<sub>2</sub>), 3) frequenza cardiaca bassa o alta, 4) altre condizioni di allarme derivanti dal mancato monitoraggio del paziente (ad esempio, in caso di disattivazione del sensore). Tale ritardo può essere causa di lesioni al paziente. **te.** Rimuovere il dispositivo dal servizio e contattare Welch Allyn.







## Selezione della stampa a flusso o batch

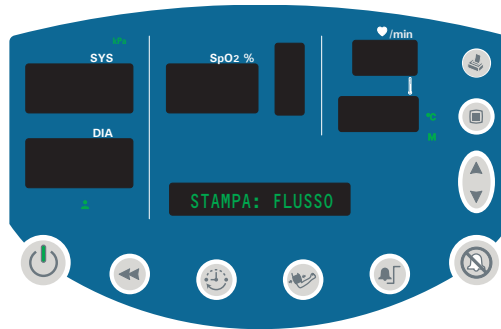
Impostazione predefinita: **BATCH**.

Per i monitor configurati con la stampante termica opzionale, eseguire la procedura che segue.

1. Tenere premuto  per tre secondi.
2. Premere  fino a visualizzare **STAMPA: BATCH** o **STAMPA: FLUSSO** nella finestra dei messaggi.



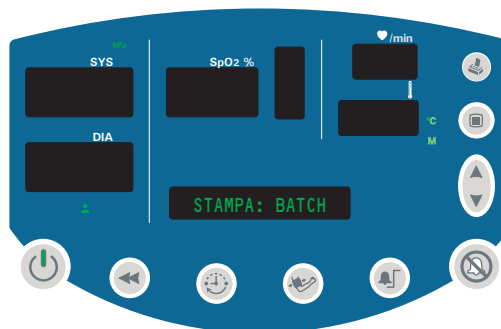3. Premere  o  per alternare la visualizzazione **STAMPA: BATCH** e **STAMPA: FLUSSO**.
4. Per impostare il metodo di stampa visualizzato e ritornare al normale funzionamento, non eseguire alcuna operazione per 10 secondi oppure premere un tasto qualsiasi che non sia  o . Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, ) il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione () attivata.



Per informazioni sull'uso della stampante, consultare [“Stampa dei dati del paziente”](#) a pagina 63.

## 3

## Monitoraggio del paziente

---

### Monitoraggio della pressione sanguigna

#### Avvertenze — NIBP



**AVVERTENZA** Per garantire misurazioni accurate e sicure della pressione sanguigna non invasiva (NIBP), usare solo bracciali e tubi flessibili approvati o forniti da Welch Allyn.

**AVVERTENZA** Non usare mai un'impostazione di monitoraggio per paziente adulto o pediatrico o un bracciale per una misurazione NIBP su un paziente neonatale. I limiti di gonfiaggio per pazienti adulti e pediatrici possono essere eccessivi per i pazienti neonatali, anche se si utilizza un bracciale per paziente neonatale.

**AVVERTENZA** Le letture della NIBP possono essere imprecise per pazienti che soffrono di aritmia da moderata a grave.

**AVVERTENZA** Quando i pazienti vengono monitorati di frequente o monitorati per un periodo prolungato, rimuovere regolarmente il bracciale per ispezionarlo e per osservare l'estremità del paziente sulla quale è stato applicato il bracciale al fine di verificare che non siano presenti sintomi di ischemia, porpora o neuropatia.

**AVVERTENZA** Per evitare rischi di collegamento errato della linea endovenosa e la possibile introduzione di aria nel sangue del paziente, non assemblare il sistema NIBP con adattatori di tipo Luer Lock.

**AVVERTENZA** Non mettere il bracciale su un'estremità già utilizzata per infusioni endovenose o per il monitoraggio SpO<sub>2</sub>.

**AVVERTENZA** Non mettere il bracciale in una posizione che possa inficiare l'opportuna circolazione.

**AVVERTENZA** Le misurazioni NIBP possono essere imprecise in presenza di un eccessivo artefatto da movimento.



**Attenzione** Le misurazioni della frequenza del polso effettuate tramite il bracciale per la misurazione della pressione arteriosa o tramite SpO<sub>2</sub> sono soggette ad artefatti e potrebbero non essere accurate quanto le misurazioni della frequenza cardiaca rilevate tramite ECG o palpazione manuale.




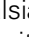
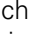


## Preparazione NIBP

Prima di iniziare la misurazione NIBP, eseguire sempre la procedura descritta di seguito.

- “Modifica del valore pressione”
- “Selezione del bracciale” a pagina 33
- “Posizionamento del bracciale” a pagina 34

### Modifica del valore pressione

Attenersi a questa procedura per modificare il valore pressione (pressione iniziale predefinita per il gonfiamento bracciale) per il tipo di paziente attuale.

1. Premere  fino a visualizzare **VALORE PRESSIONE**.  
Nella finestra SIS è visualizzata l'impostazione attuale per la pressione iniziale di gonfiamento.
2. Premere  o  per aumentare o diminuire il valore predefinito della pressione al livello desiderato.
3. Per impostare il livello visualizzato della pressione e ritornare al normale funzionamento, non eseguire alcuna operazione per 10 secondi oppure premere un tasto qualsiasi che non sia  o . Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, ) , il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione () attivata.

**Nota** Il valore pressione è un punto nominale di inizio. Se è troppo basso per effettuare la misurazione, il monitor esegue un'altra misurazione utilizzando una pressione iniziale superiore.

Se le seguenti azioni e condizioni si verificano in sequenza, il comportamento del monitor differisce da quanto descritto in “Modifica del valore pressione”.

Azione 1. Si seleziona una pressione target non predefinita.

Azione 2. Si avvia una misurazione NIBP.

Condizione 1. La pompa raggiunge la pressione target e la pressione viene gradualmente rilasciata.

Condizione 2. Il rilascio della pressione si interrompe (artefatto da movimento o viene premuto il pulsante avvio/stop per NIBP) e il ciclo di misurazione non viene completato.

Azione 3. Si seleziona la pressione target predefinita.

Azione 4. Si riavvia la misurazione NIBP.

In queste condizioni, il monitor non utilizza la pressione target predefinita ma la pressione target impostata nell'Azione 1.

- Dopo una misurazione NIBP riuscita, il monitor regola i tentativi NIBP successivi per pompare alla pressione target più bassa possibile per il corretto funzionamento.
- Dopo una misurazione non riuscita, il monitor aumenta la pressione target e pompa per uno, due o tre tentativi prima di interrompere il funzionamento.

Se l'Azione 1 e l'Azione 2 portano alla Condizione 1 e alla Condizione 2, procedere come segue per ripristinare il funzionamento normale del monitor:

1. Spegnerne il monitor.
2. Accendere il monitor.

Avviare la misurazione della pressione arteriosa utilizzando la pressione target predefinita.

### Selezione del bracciale

È possibile stabilire se le dimensioni del bracciale sono appropriate mettendo il bracciale sul paziente e verificando la misura. Se la linea del segno si trova tra i due contrassegni di delimitazione, la misura sarà corretta.

È altresì possibile trovare il bracciale corretto misurando la circonferenza del braccio all'altezza del bicipite del paziente.

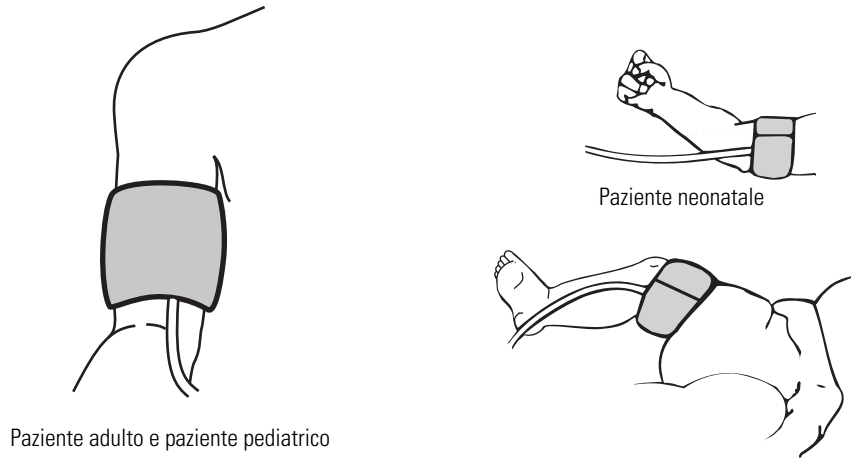
<b>Dimensione bracciale</b>	<b>Circonferenza (in pollici)</b>	<b>Circonferenza (in centimetri)</b>	<b>Dimensione bracciale</b>	<b>Circonferenza (in pollici)</b>	<b>Circonferenza (in centimetri)</b>
Neonato n. 1	1,3 - 2,2	3,3 - 5,6	Bambino non robusto	4,9 - 6,6	12,4 - 16,8
Neonato n. 2	1,6 - 2,8	4,2 - 7,1	Bambino	6,2 - 8,4	15,8 - 21,3
Neonato n. 3	2,1 - 3,6	5,4 - 9,1	Adulto non robusto	7,9 - 10,6	20,0 - 27,0
Neonato n. 4	2,4 - 4,6	6,9 - 11,7	Adulto	10,0 - 13,5	25,3 - 34,3
Neonato n. 5	3,5 - 5,9	8,9 - 15,0	Adulto robusto	12,6 - 17,1	32,1 - 43,4
Neonato (fino a 28 mesi)	3,9 - 5,2	9,8 - 13,3	Coscia	16,0 - 21,7	40,7 - 55,0

## Posizionamento del bracciale

Per misurazioni più accurate, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Mettere il bracciale sul braccio nudo, a metà tra la spalla e il gomito.

Le tipiche posizioni del bracciale sono illustrate nella figura che segue.



2. Posizionare il contrassegno di allineamento del bracciale direttamente sull'arteria brachiale.

**Note** Assicurarsi che il bracciale non sia troppo stretto o allentato. Mentre lo si mette sul paziente, stringerlo in modo che due dita possano comodamente tra il bracciale e il braccio.

Assicurarsi che il tubo dell'aria non sia attorcigliato o piegato.


Durante la misurazione non invasiva della pressione sanguigna, limitare il movimento del bracciale e dell'estremità dove è stato applicato.

Se il bracciale non è a livello col cuore, aggiungere 1,8 mmHg alla lettura visualizzata per ciascun pollice di elevazione sopra al cuore, oppure sottrarre 1,8 mmHg dalla lettura visualizzata per ciascun pollice di elevazione al di sotto del cuore.

Usare sempre la dimensione di bracciale appropriata per ciascun paziente.


## Misurazione manuale non invasiva della pressione sanguigna

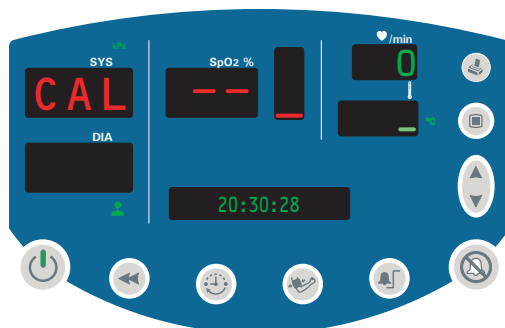Attenersi alla procedura che segue per effettuare una singola misurazione NIBP.


1. Fissare il bracciale al braccio del paziente.
2. Premere .

  - Il monitor gonfia il bracciale.
  - La finestra SIS visualizza in modo dinamico l'attuale pressione del bracciale.

**Nota** Durante l'avvio di un ciclo NIBP la visualizzazione del messaggio "CAL", nella finestra dei messaggi, indica che il sistema di calibrazione NIBP sta eseguendo la calibrazione automatica e non è disponibile al momento (fino a 30 secondi). Il ciclo NIBP richiesto ha inizio quando la calibrazione è terminata. Tuttavia, il bracciale deve rimanere fisso per almeno 15 secondi per consentire il completamento della calibrazione.



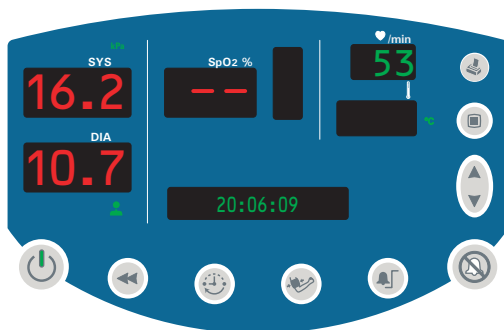- Al termine del ciclo NIBP, viene riprodotto un segnale acustico e i risultati della misurazione NIBP vengono visualizzati nelle finestre SIS, DIA e frequenza del polso.



- Se l'opzione PAM è attivata, i relativi risultati sono visualizzati nella finestra dei messaggi.

**Nota** Se il sensore SpO<sub>2</sub> è collegato e genera dati della frequenza del polso validi, la frequenza del polso visualizzata viene ricavata dalla lettura del sensore SpO<sub>2</sub>.


La visualizzazione della misurazione rimarrà per due minuti o fino all'avvio di un altro ciclo NIBP. In caso di rilevamento di un errore, viene riprodotto un segnale acustico e nella finestra SIS appare il codice guasto.

## Misurazione automatica NIBP

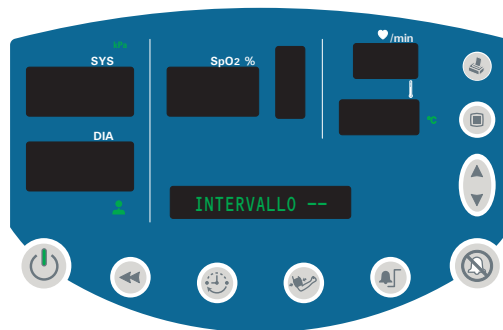
Le misurazioni automatiche non invasive della pressione sanguigna si ripetono di continuo ad intervalli programmati.



**Nota** L'intervallo è il lasso di tempo dall'inizio di un ciclo di misurazione fino all'inizio del successivo ciclo di misurazione.

Per impostare la misurazione automatica non invasiva della pressione sanguigna, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Fissare il bracciale al braccio del paziente.
2. Premere  per impostare l'intervallo di misurazione.

I due trattini (--) visualizzati nella finestra dei messaggi indicano che la misurazione automatica è disattivata.



3. Per definire un intervallo, premere  o  per scorrere le opzioni, che includono --, ST ed una serie di intervalli: gli intervalli possibili sono: 1, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 e 240 minuti.

**Nota** La selezione dell'intervallo **ST** agisce diversamente dagli altri intervalli. Per informazioni sull'uso di queste impostazioni, consultare [“Misurazione STAT”](#) a pagina 39.



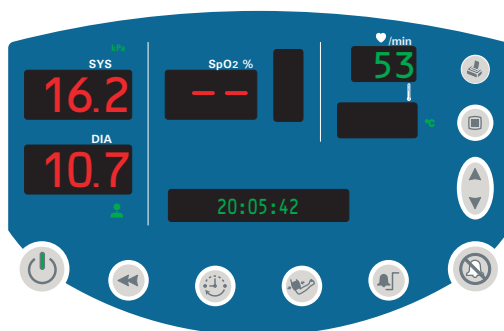
4. Per selezionare l'intervallo attualmente visualizzato, premere un pulsante qualsiasi che non sia ☺, ▲ o ▼.

Dieci secondi dopo la selezione di un intervallo, e presupponendo il mantenimento per almeno 30 secondi del valore di sicurezza della pressione venosa di ritorno (SVRP), il monitor avvia il primo ciclo NIBP automatico e avviene quanto elencato di seguito.

- Il bracciale viene gonfiato fino al livello predefinito di pressione.
- La finestra SIS visualizza in modo dinamico l'attuale pressione del bracciale.
- In caso di attivazione dell'opzione PAM, il valore della misurazione PAM si alterna con la visualizzazione dell'ora nella finestra dei messaggi.

**Nota** In caso di allarme PAM, viene costantemente visualizzata la voce PAM nella finestra dei messaggi.

Non appena termina il ciclo NIBP, viene riprodotto un segnale acustico e il monitor visualizza i risultati della misurazione, compresa la frequenza del polso nella finestra ♥/min. (Se il sensore SpO<sub>2</sub> è applicato al paziente, la frequenza del polso viene ricavata dal sensore SpO<sub>2</sub>.)




La visualizzazione della misurazione resterà fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- inizia il ciclo successivo, se il monitor si trova ancora nella modalità NIBP
- trascorrono due minuti
- viene nuovamente premuto ☺

**Nota** Se il primo ciclo non produce una misurazione, il monitor ripeterà la procedura utilizzando un valore di pressione calcolato in base ai risultati del ciclo precedente.

I cicli automatici non invasivi della pressione continueranno fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi.

- Il monitor raggiunge il limite di 5 minuti per la misurazione STAT. (Il ciclo attuale continua fino al completamento, pur superando il limite di 5 minuti.)
- Il monitor si ferma, perché è stato premuto .
- Il monitor si ferma per l'attivazione di una condizione di allarme, anomalia tecnica o guasto.
- Il codice intervallo cambia in "--".



In caso di rilevamento di un errore durante la misurazione, viene riprodotto un segnale acustico e nella finestra SIS appare il codice guasto.

**Nota** L'ultima misurazione NIBP resterà fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:


- inizia il successivo ciclo NIBP
- viene attivata una condizione di allarme, anomalia tecnica o guasto
- il monitor si spegne

## Misurazione PAM

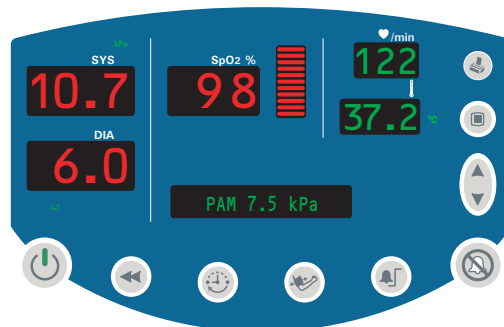La misurazione PAM è possibile per i pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Il monitor viene impostato sul valore predefinito in fabbrica per attivare il controllo dei valori minimo e massimo di visualizzazione e di allarme PAM per i pazienti neonatali, e per disattivare tali funzioni per i pazienti adulti e pediatrici.

Ad ogni modifica del tipo di paziente (,  o ) o spegnimento del monitor, il monitor ripristina le impostazioni di attivazione e disattivazione PAM predefinite.

Se viene attivata la misurazione PAM, il monitor visualizza le letture PAM nella finestra dei messaggi al termine delle misurazioni non invasive della pressione sanguigna.



## Effetti sulle impostazioni PAM predefinite della modifica del tipo di paziente

Il monitor memorizza tutte le impostazioni correnti prima dello spegnimento, che vengono quindi utilizzate alla successiva accensione. Ciò non incide sulle impostazioni predefinite.

Ogni volta che si attiva o disattiva il PAM per un dato tipo di paziente - Adulto, Pediatrico o Neonatale - l'impostazione correntemente attivata/disattivata diventa l'impostazione predefinita all'accensione per quel tipo di paziente.

Esempio: se il monitor è impostato su Neonatale e si seleziona PAM disattivato, questa impostazione diventa quella predefinita per i pazienti neonatali finché non viene modificata nuovamente.

## Attivazione e disattivazione della misurazione PAM

Vedere ["Attivazione e disattivazione della misurazione PAM"](#) a pagina 26.

## Misurazione STAT

Se l'intervallo selezionato è STAT, il monitor ripete le misurazioni non invasive della pressione sanguigna per 5 minuti, iniziando un nuovo ciclo ogni volta che il bracciale si sgonfia superando il valore di sicurezza della pressione venosa di ritorno per due secondi.

Le attuali pressioni del bracciale non vengono visualizzate in modo dinamico durante la lettura STAT. La lettura NIBP del ciclo precedente appare nella finestra dei messaggi fino al termine del ciclo attuale. (Prima del termine del primo ciclo, sul display appare "0".)

# Monitoraggio della frequenza del polso

Il monitor visualizza la frequenza del polso al termine di tutte le misurazioni non invasive della pressione sanguigna o SpO<sub>2</sub>. Visualizza le informazioni relative alla pulsazione NIBP solo in caso di indisponibilità della lettura SpO<sub>2</sub>.

Se il sensore SpO<sub>2</sub> è collegato al paziente durante il periodo di misurazione, l'indicatore dell'ampiezza della pulsazione sale e scende seguendo il ritmo della frequenza cardiaca monitorata. Più sale la visualizzazione, più forte è la pulsazione misurata; ciononostante, l'altezza della visualizzazione dell'indicatore non è matematicamente proporzionale al volume della pulsazione.

# Monitoraggio dell'SpO<sub>2</sub>

## Avvertenze e precauzioni — SpO<sub>2</sub>



**AVVERTENZA** Attenersi sempre alle istruzioni del produttore per la cura e l'uso del sensore dell'SpO<sub>2</sub>.

**AVVERTENZA** L'accuratezza della misurazione SpO<sub>2</sub> può risultare compromessa da una delle seguenti condizioni:

- presenza di quantità considerevoli di emoglobina ridotta, quale carbossi-emoglobina o metaemoglobina;
- presenza di concentrazioni di alcuni coloranti intravascolari, in quantità sufficiente da alterare la normale pigmentazione delle arterie del paziente;
- spostamento del paziente;
- alcune condizioni del paziente, quali brividi o inalazione di fumo;
- unghie smaltate;
- perfusione di ossigeno insufficiente;
- anemia o basse concentrazioni di emoglobina;
- ipotensione o ipertensione;
- grave vasocostrizione;
- collasso o arresto cardiaco;
- pulsazioni venose o improvvisi e considerevoli cambi della frequenza del polso;
- vicinanza ad un ambiente destinato alla risonanza magnetica nucleare (RM);
- presenza di umidità nel sensore;
- eccessiva illuminazione nell'ambiente (in particolare con l'illuminazione a fluorescenza);
- sensore inadeguato o sensore troppo stretto

**AVVERTENZA** In caso di dubbi sull'accuratezza della misurazione SpO<sub>2</sub>, verificare la misurazione avvalendosi di un altro metodo clinicamente accettato.



**AVVERTENZA** Durante il monitoraggio prolungato e continuo dell'SpO<sub>2</sub>, controllare frequentemente il sito del sensore, attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore del sensore. Controllare l'integrità della cute e la circolazione del paziente, e spostare il sensore all'occorrenza. L'applicazione non corretta o prolungata del sensore può causare danni ai tessuti.

**AVVERTENZA** Usare esclusivamente sensori ed accessori raccomandati da Welch Allyn.

**AVVERTENZA** Non utilizzare sensori o cavi danneggiati.

**AVVERTENZA** Non utilizzare il sensore mentre i componenti ottici sono esposti.

**AVVERTENZA** Non immergere il sensore in liquidi e non bagnarlo.

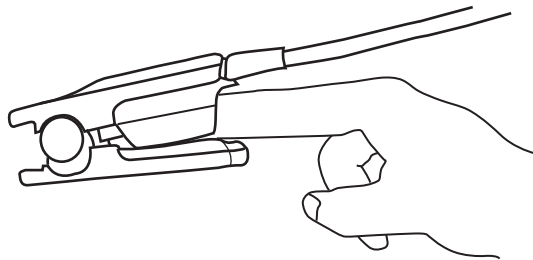


**Attenzione** È possibile che alcuni sensori non funzionino con alcune tipologie di pazienti. Se, dopo 20 secondi, un sensore funzionante correttamente non riesce a individuare la pulsazione, attenersi alla procedura che segue.

1. Regolare o riposizionare il sensore. Se il problema continua:
2. Usare un tipo di sensore diverso.

## Procedura di monitoraggio dell'SpO<sub>2</sub>


1. Assicurarsi che il cavo del sensore SpO<sub>2</sub> sia collegato al monitor.
2. Fissare il sensore a clip per la misurazione dell'SpO<sub>2</sub> all'estremità dell'indice del paziente, come illustrato di seguito. È possibile fissare il sensore al paziente quando il monitor è acceso o spento, e durante un ciclo di misurazione non invasiva della pressione sanguigna.



**AVVERTENZA** Il sensore a clip per la misurazione dell'SpO<sub>2</sub> ed il bracciale per la misurazione della pressione sanguigna non devono essere utilizzati contemporaneamente sullo stesso arto. Diversamente, si otterranno letture imprecise della frequenza del polso e della perfusione, con allarmi sbagliati della frequenza del polso.

In pochi secondi, l'indicatore dell'ampiezza della pulsazione riflette la frequenza e l'intensità della pulsazione.

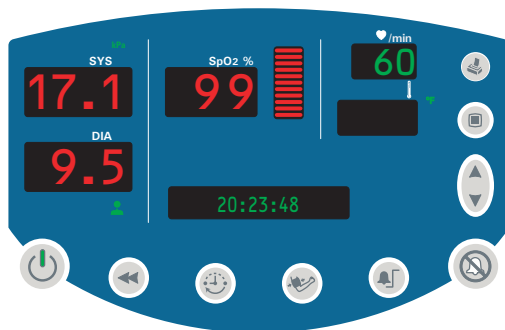Entro meno di 20 secondi, la finestra SpO<sub>2</sub> visualizza la misurazione dell'SpO<sub>2</sub> e il valore numerico della frequenza del polso appare in ♥/min.



**Nota** Durante la misurazione dell'SpO<sub>2</sub>, la frequenza del polso visualizzata viene ricavata dalla lettura del sensore di SpO<sub>2</sub>. Diversamente, la frequenza del polso viene ricavata dalla NIBP.

Lo scollegamento del sensore durante la misurazione SpO<sub>2</sub> comporta l'attivazione di un allarme.

Se gli allarmi sono impostati per l'SpO<sub>2</sub> o la frequenza del polso, l'assenza della pulsazione per 5-10 secondi attiva l'allarme.

In caso di misurazione continua e prolungata dell'SpO<sub>2</sub> in un paziente, spostare il sensore almeno ogni tre ore o secondo quanto richiesto dalle istruzioni fornite con il sensore.

Per regolare il volume del segnale dell'impulso dell'SpO<sub>2</sub>, consultare ["Modifica del volume del segnale dell'impulso"](#) a pagina 29.



**Attenzione** Gli utenti devono controllare l'emissione di segnali di impulsi acustici in caso di utilizzo della funzione SpO<sub>2</sub>. Se ciò non si verifica, l'audio non funziona correttamente. Rimuovere il dispositivo dal servizio e contattare Welch Allyn.

In caso di mancata emissione dell'allarme acustico, il medico potrebbe accorgersi in ritardo di una situazione di allarme legata alle seguenti condizioni: 1) ipotensione o ipertensione, 2) basso livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO<sub>2</sub>), 3) frequenza cardiaca bassa o alta, 4) altre condizioni di allarme derivanti dal mancato monitoraggio del paziente (ad esempio, in caso di disattivazione del sensore). Tale ritardo può essere causa di lesioni al paziente.

# Monitoraggio della temperatura

## Avvertenze e precauzioni — Temperatura



**AVVERTENZA** Per garantire la sicurezza del paziente e per ottenere risultati inerenti alla temperatura accurati ed affidabili, leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare lo strumento per la temperatura.

**AVVERTENZA** Non misurare mai la temperatura senza mettere il coprisonda sulla punta della sonda. Anche se è possibile effettuare una misurazione senza il coprisonda, questa sarà imprecisa, e l'esecuzione di una misurazione con una sonda scoperta può risultare pericolosa per il paziente.

**AVVERTENZA** Per limitare la contaminazione crociata dei pazienti, utilizzare esclusivamente dei coprisonda monouso della Welch Allyn. L'uso di un qualsiasi altro coprisonda, o il mancato utilizzo del coprisonda, possono mettere a repentaglio la sicurezza dei pazienti e dare luogo a misurazioni della temperatura imprecise.

**AVVERTENZA** Non utilizzare mai una seconda volta il coprisonda.

**AVVERTENZA** L'uso di una sonda nel sito sbagliato genera misurazioni imprecise con conseguenti lesioni per il paziente.

- Per misurare le temperature per via orale e ascellare, avvalersi solo di sonde per uso orale, identificate da un pulsante di espulsione di colore blu sulla sommità della sonda.
- Per misurare le temperature per via rettale, avvalersi solo di sonde per uso anale, identificate da un pulsante di espulsione di colore rosso sulla sommità della sonda.

**AVVERTENZA** Con la sonda per uso orale utilizzare esclusivamente il rispettivo pozzetto e con la sonda per uso rettale utilizzare il rispettivo pozzetto. L'utilizzo del pozzetto sbagliato potrebbe causare contaminazione incrociata.

**AVVERTENZA** Controllare sempre il coprisonda diretto a contatto della pelle. Non rilevare la temperatura ascellare attraverso gli abiti del paziente.

**AVVERTENZA** Prestare estrema cautela quando si prende la temperatura per via rettale nei bambini. Inserire la punta della sonda per solo un 1 cm circa onde evitare la perforazione dell'intestino.

**AVVERTENZA** La custodia del termometro non è impermeabile. Non immergerla in liquidi né versare liquidi su di essa.

**AVVERTENZA** Il termometro è composto da parti di precisione d'alta qualità. Evitare forti impatti o urti. Non utilizzare il termometro se si notano segni di danni alla sonda o allo strumento. Se la sonda del termometro cade o subisce dei danni, rimuoverla dall'apparecchiatura e sottoporla a un controllo da parte di un tecnico qualificato.

**AVVERTENZA** Non utilizzare lo strumento per la misurazione della temperatura per un utilizzo diverso da quello descritto in questo documento, per non rendere nulla la garanzia del prodotto.

## Impostazione del tipo di misurazione di temperatura

Se il monitor è configurato con l'opzione per il rilevamento della temperatura, esso può fornire misurazioni predittive e monitorate della temperatura.

La **misurazione predittiva** è una misurazione unica effettuata solo per alcuni secondi. Conduce ad una lettura unica della temperatura che viene visualizzata al termine del breve periodo di misurazione. Il monitor emette tre segnali acustici ad indicare la fine della misurazione predittiva.


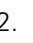

La **misurazione monitorata** è un monitoraggio costante della temperatura, utilizzato quando la situazione impedisce la misurazione predittiva accurata. Per misurazioni per via orale e rettale, si consigliano tre minuti di monitoraggio. Per le misurazioni per via ascellare, si consigliano cinque minuti di monitoraggio.








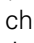


**AVVERTENZA** Non eccedere i tempi di misurazione consigliati di tre minuti per la misurazione per via orale e rettale e di cinque minuti per la misurazione per via ascellare.

Durante una misurazione monitorata, la temperatura viene visualizzata per via dinamica durante il periodo di misurazione. Diversamente dalla misurazione predittiva, il monitor non indica la fine del tempo trascorso per la misurazione monitorata.

Selezione del tipo di misurazione della temperatura.

1. Premere ripetutamente  fino a visualizzare **MOD. TEMP.** nella finestra dei messaggi.
2. Premere  o  per scorrere la visualizzazione fino all'opzione che si intende selezionare:

 F	Fahrenheit predittiva	 C	Celsius predittiva
 F	Fahrenheit monitorata	 C	Celsius monitorata
<b>M</b>		<b>M</b>	

3. Per impostare il tipo di misurazione della temperatura e ritornare al normale funzionamento, non eseguire alcuna operazione per 10 secondi oppure premere un tasto qualsiasi che non sia  o . Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, ) , il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione () attivata.



## Montaggio del coprisonda

1. Tenendo l'impugnatura della sonda con il pollice e due dita sui rientri dell'impugnatura della sonda, estrarre la sonda dal relativo pozzetto.
2. Inserire la sonda nel coprisonda, quindi premere con forza l'impugnatura della sonda, che si sposterà leggermente, innestando il coprisonda.

## Espulsione del coprisonda utilizzato

Non toccare il coprisonda utilizzato.

1. Sistemare la sonda su un apposito contenitore per lo smaltimento.
2. Tenendo saldamente la sonda, premere il pulsante di espulsione del coprisonda (blu o rosso) in modo da rimuovere il coprisonda nell'apposito contenitore per lo smaltimento.

## Misurazione predittiva della temperatura

**Nota** Assicurarsi che sia stata impostata la misurazione predittiva della temperatura.

(Viene visualizzato °F o °C; la lettera "M" *non* è illuminata.)



Per impostare le temperature predittive, fare riferimento alla procedura descritta a ["Modifica del tipo di temperatura e delle unità di misurazione"](#) a pagina 28.

Per effettuare una misurazione della temperatura predittiva, attenersi alla procedura descritta di seguito.

## Misurazione predittiva orale

Se utilizzato correttamente, il monitor esegue un'accurata misurazione della temperatura orale in meno di 6 secondi.

**Nota** Per le temperature per via orale, avvalersi solo della sonda per uso orale (pulsante di espulsione blu) e del pozzetto della sonda di colore blu.

1. Rimuovere la sonda di misurazione della temperatura dal relativo portasonda.

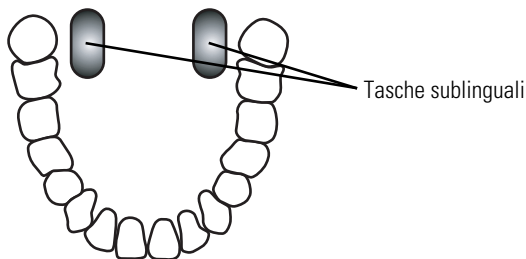
La sonda della temperatura esegue un test automatico, visualizzando **188.8** per alcuni secondi. Non appena è pronta per l'uso, la finestra della temperatura si azzerà e quindi visualizza **OrL**.

2. Montare un nuovo coprisonda, inserendo la sonda nel coprisonda. Quindi premere con forza l'impugnatura della sonda, che si sposterà leggermente, innestando il coprisonda.



**Attenzione** Utilizzare esclusivamente coprisonda Welch Allyn. Il mancato utilizzo del coprisonda o l'uso di altri coprisonda può provocare errori di misurazione o imprecisioni.

3. Sistemare la punta della sonda sotto la lingua del paziente, a lato della bocca e in profondità all'interno dell'area sublinguale..



4. Chiedere al paziente di chiudere le labbra intorno alla sonda.



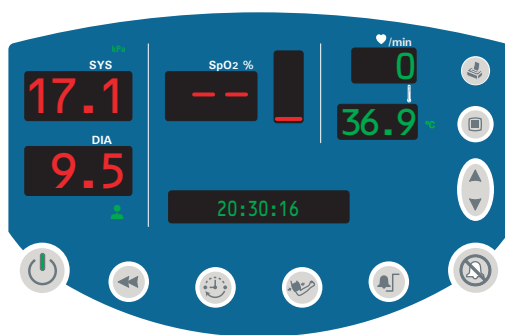
**Attenzione** Se il paziente morde la sonda, potrebbe danneggiarla.

5. Tenere ferma la sonda in modo da garantire il continuo contatto con il tessuto auricolare fino al completamento della misurazione.

I segmenti rotanti appaiono nella finestra della temperatura del monitor, indicando che la misurazione è in corso.

**Nota** È necessario che la sonda rimanga costantemente a contatto con la tasca sublinguale per tutto il periodo di misurazione, diversamente il monitor non prevede la temperatura in modo accurato.

Durante il periodo della misurazione, la finestra della temperatura visualizza una "casella mobile", una casella con i lati illuminati in sequenza. Al completamento della previsione della temperatura, il monitor emette tre segnali acustici brevi e visualizza la lettura della temperatura, che permane per un minuto.



6. Espellere il coprisonda premendo il pulsante di espulsione; smaltire il coprisonda rispettando le opportune misure igieniche.
7. Rimettere la sonda nel rispettivo pozzetto.

Se il monitor non è in grado di eseguire una misurazione predittiva entro 60 secondi, ritorna alla misurazione monitorata della temperatura continuando a monitorare la temperatura del paziente. (Per maggiori informazioni, consultare ["Misurazione monitorata della temperatura"](#) a pagina 51.)



**Attenzione** Non monitorare la temperatura per un tempo superiore a 5 minuti.

**Nota** L'errore di posizione sonda (P) indica che la sonda è stata spostata dopo il contatto col tessuto. Se si verifica un errore di posizione sonda durante la determinazione della temperatura, la visualizzazione della temperatura misurata si alterna con 'P'.



**AVVERTENZA** Se la sonda viene contaminata, attenersi alle istruzioni fornite nella sezione relativa alla ["Procedura di pulizia del termometro e della sonda"](#) a pagina 52.

## Misurazione predittiva ascellare

Se utilizzato correttamente, il monitor esegue un'accurata misurazione della temperatura ascellare in meno di 15 secondi per gli adulti e in meno di 13 secondi per i pazienti pediatrici.



**Nota** Per le temperature per via ascellare, avvalersi solo della sonda per uso orale (pulsante di espulsione blu) e del pozzetto della sonda di colore blu.

Utilizzare misurazioni pediatriche per via ascellare **(AP)** per pazienti fino a 17 anni di età.

Utilizzare misurazioni pazienti adulti per via ascellare **(AA)** per pazienti di 18 e più anni.

1. Rimuovere la sonda di misurazione della temperatura dal relativo portasonda.

La sonda della temperatura esegue un test automatico, visualizzando **188.8** per alcuni secondi. Non appena è pronta per l'uso, la finestra della temperatura si azzerà e quindi visualizza **OrL**.

2. Premere  o  per visualizzare **AP** o **AA**.
3. Montare un nuovo coprisonda, inserendo la sonda nel coprisonda. Quindi premere con forza l'impugnatura della sonda, che si sposterà leggermente, innestando il coprisonda.



**Attenzione** Utilizzare esclusivamente coprisonda Welch Allyn. Il mancato utilizzo del coprisonda o l'uso di altri coprisonda può provocare errori di misurazione o imprecisioni.

**Nota** Assicurarsi che nulla entri in contatto con la punta della sonda prima di sistemarla nel sito di misurazione per via ascellare.

4. Sollevare il braccio del paziente in modo da esporre completamente l'ascella.

**Nota** Evitare che la punta della sonda entri in contatto con il paziente finché non viene collocata nel sito di misurazione. Ogni altro contatto può provocare una lettura imprecisa.

5. Mettere la punta della sonda il più in alto possibile nell'ascella e quindi abbassare il braccio del paziente per ottenere il contatto massimo con la punta della sonda. Tenere il braccio del paziente in questa posizione, tenendo il paziente il più fermo possibile, per la durata della misurazione.

**Nota** Assicurarsi che la punta della sonda sia completamente coperta dall'ascella e dal braccio, e che non sia a contatto con gli indumenti. Non tentare di rilevare la temperatura ascellare attraverso gli abiti del paziente.

Durante il periodo della misurazione, la finestra della temperatura visualizza una "casella mobile", una casella con i lati illuminati in sequenza. Al completamento della previsione della temperatura, il monitor emette un segnale acustico breve e visualizza la lettura della temperatura, che permane per un minuto.

6. Rimuovere la sonda dall'ascella del paziente.
7. Espellere il coprisonda premendo il pulsante di espulsione; smaltire il coprisonda rispettando le opportune misure igieniche.
8. Rimettere la sonda nel rispettivo pozzetto.

Se il monitor non è in grado di eseguire una misurazione predittiva entro 60 secondi, passa alla misurazione monitorata della temperatura. (Per maggiori informazioni, consultare ["Misurazione monitorata della temperatura"](#) a pagina 51.)

**Nota** Se si verifica un errore di posizione sonda durante la determinazione della temperatura, la visualizzazione della temperatura misurata si alterna con "P".



**Attenzione** Non monitorare la temperatura per un tempo superiore a 5 minuti.



**AVVERTENZA** Se la sonda viene contaminata, attenersi alle istruzioni fornite nella sezione relativa alla ["Procedura di pulizia del termometro e della sonda"](#) a pagina 52.

## Misurazione predittiva rettale

Se utilizzato correttamente, il monitor esegue un'accurata misurazione della temperatura rettale in meno di 13 secondi.



**Attenzione** Non monitorare la temperatura per un tempo superiore a 5 minuti.

**Nota** Per le temperature per via rettale, avvalersi solo della sonda per uso rettale (pulsante di espulsione rosso) e del pozzetto della sonda di colore rosso.

1. Rimuovere la sonda di misurazione della temperatura dal relativo portasonda.

La sonda della temperatura esegue un test automatico, visualizzando **188.8** per alcuni secondi. Non appena è pronta per l'uso, riproduce un doppio segnale acustico, la finestra della temperatura si azzerà, e quindi visualizza **rET** nella finestra dei messaggi.

2. Mettere un coprisonda sulla sonda.
3. Applicare un sottile strato di lubrificante a base acquosa sulla punta del coprisonda.
4. Separare le natiche del paziente con una mano.
5. Inserire la punta della sonda di 1.5 centimetro (5/8 inch) nello sfintere rettale. Inclinare leggermente la sonda per garantire il buon contatto con il tessuto, e tenere separate le natiche durante il periodo di misurazione.



**AVVERTENZA** Prestare estrema cautela per evitare rischi di perforazione dell'intestino.

Durante il periodo della misurazione, la finestra della temperatura visualizza una "casella mobile", una casella coi lati illuminati in sequenza. Non appena termina la misurazione, il monitor riproduce un segnale acustico e visualizza la misurazione nella finestra della temperatura.

Il monitor visualizza la lettura della temperatura per un minuto.

**Nota** Se si verifica un errore di posizione sonda durante la determinazione della temperatura, la visualizzazione della temperatura misurata si alterna con "P".

6. Rimuovere la sonda.
7. Espellere il coprisonda premendo il pulsante di espulsione e smaltirlo rispettando le opportune misure igieniche.
8. Rimettere la sonda nel rispettivo pozzetto.



**AVVERTENZA** Se la sonda viene contaminata, attenersi alle istruzioni fornite nella sezione relativa alla "[Procedura di pulizia del termometro e della sonda](#)" a pagina 52.

## Misurazione monitorata della temperatura

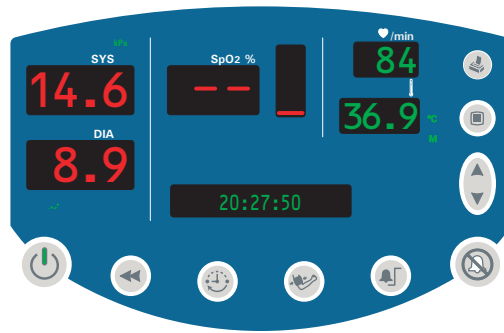
**Nota** Assicurarsi che sia stata impostata la misurazione monitorata della temperatura. (La lettera **M**, sulla destra della finestra di visualizzazione della temperatura e sotto **°F** o **°C**, è illuminata.)



Le procedure per le misurazioni monitorata e predittiva della temperatura sono uguali, con le seguenti eccezioni.

Per le misurazioni monitorate

- Il monitor deve essere impostato per eseguire la misurazione monitorata della temperatura. (Per maggiori informazioni, consultare "[Modifica del tipo di temperatura e delle unità di misurazione](#)" a pagina 28.)
- Il monitor visualizza di continuo la temperatura.
- La misurazione continua fino a quando la sonda viene rimessa nel rispettivo portasonda.



## Procedura di pulizia del termometro e della sonda

1. Pulire regolarmente il termometro con un panno inumidito con acqua calda ed un detergente delicato.
2. Pulire saltuariamente il termometro e la sonda secondo necessità con alcol isopropilico al 70% o con soluzione candeggiante al 10%.



**Attenzione** Non immergere né lasciare a mollo il termometro o la sonda in nessun tipo di liquido.

**Attenzione** Non sterilizzare a vapore, a calore o a gas il termometro o la sonda.

**Attenzione** Non sterilizzare in autoclave il termometro o la sonda.



## Procedura di pulizia del pozzetto rimovibile della sonda

1. Rimuovere la sonda dal pozzetto, rimuovere il pozzetto dal monitor, e quindi scollegare il connettore del cavo del termometro dal monitor.
2. Pulire le superfici interna ed esterna del pozzetto con un panno inumidito con alcol isopropilico al 70% o una soluzione candeggiante al 10%. È possibile immergere il pozzetto della sonda durante la pulizia.



**Attenzione** Non utilizzare oggetti solidi, acuminati o abrasivi per la pulizia del pozzetto della sonda.

**Attenzione** Non sterilizzare a vapore, a caldo o con gas il pozzetto della sonda.

**Attenzione** Non sterilizzare il pozzetto della sonda in autoclave.

3. Pulire accuratamente tutte le superfici.
4. Riassemblare i componenti del termometro.
5. Ricollegare il cavo del termometro al monitor, assicurandosi che scatti in posizione.
6. Rimettere il pozzetto della sonda nel monitor.
7. Inserire la sonda nel rispettivo pozzetto.

**Nota** È possibile sostituire qualsiasi componente del termometro, incluso il pozzetto della sonda.



**AVVERTENZA** Utilizzare soltanto con accessori approvati da Welch Allyn. Visitare il sito Web [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com). L'utilizzo di accessori diversi può generare dati del paziente non accurati, causare danni all'apparecchiatura e comportare l'annullamento della garanzia del prodotto.



## 4

## Allarmi e anomalie

---



**AVVERTENZA** Se si disattiva un limite di allarme rispondendo ad un allarme, assicurarsi di ripristinare i limiti di allarme prima di riprendere il monitoraggio del paziente.

### Risposta ad un allarme paziente




**AVVERTENZA** Se si verificano contemporaneamente un allarme associato al paziente e un'anomalia tecnica, occuparsi prima dell'allarme associato al paziente.

L'allarme associato al paziente avviene quando la misurazione di un segno vitale non rientra nei limiti programmati.

Durante un allarme associato al paziente, il monitor riproduce un segnale acustico di allarme, una serie ripetuta di brevi segnali acustici intermittenti, facendo lampeggiare i valori numerici associati all'allarme nella finestra appropriata. L'allarme attiva anche il relè di chiamata infermiere se è collegato il cavo di chiamata infermiere.

Rispondere attenendosi alla procedura descritta di seguito.

1. Premere  per tacitare immediatamente il segnale acustico d'allarme.
  - Per gli allarmi associati all' $\text{SpO}_2$ , l'allarme riprende dopo 90 secondi se la condizione di allarme non è stata corretta.
  - Per gli allarmi correlati alla misurazione non invasiva della pressione sanguigna, l'allarme viene ripristinato.
  - Per gli allarmi correlati alla PAM, le letture delle misurazioni PAM lampeggiano sulla finestra dei messaggi.
2. Verificare le condizioni del paziente e prestare le cure adeguate.

## Risposta a un'anomalia tecnica



**AVVERTENZA** Se si verificano contemporaneamente un allarme associato al paziente ed un'anomalia tecnica, occuparsi prima dell'allarme associato al paziente.

### Anomalia di temperatura, NIBP o SpO<sub>2</sub> recuperabile—Senza escalation

La maggior parte delle anomalie tecniche recuperabili non raggiunge il livello degli allarmi paziente. Se si verifica un'anomalia senza escalation, adottare le misure necessarie a correggere il problema e riprendere il monitoraggio del paziente.

In caso di anomalia tecnica senza escalation per temperatura, NIBP o SpO<sub>2</sub>, il monitor esegue quanto specificato di seguito:

- Emette un segnale acustico
- Visualizza un codice di errore (Cxx) nella relativa finestra: Temp, SIS, DIA o SpO<sub>2</sub>

### Anomalia SpO<sub>2</sub> recuperabile—Con escalation

Un'anomalia tecnica SpO<sub>2</sub> raggiunge sempre immediatamente il livello di allarme paziente se si presenta quando si verificano **entrambe** le seguenti condizioni:

- Il monitoraggio SpO<sub>2</sub> è iniziato e il monitor ha registrato una misurazione SpO<sub>2</sub>
- È stato impostato un limite di allarme SpO<sub>2</sub> o di frequenza del polso

Vedere ["Risposta ad un allarme paziente"](#) a pagina 55.

### Anomalia NIBP recuperabile—Con escalation

Un'anomalia tecnica NIBP raggiunge il livello di allarme paziente quando si presentano entrambe le seguenti condizioni:


- Si verificano due anomalie tecniche NIBP consecutive mentre il monitor sta effettuando le misurazioni NIBP/FP automatiche
- Gli allarmi sono attivati

Vedere ["Risposta ad un allarme paziente"](#) a pagina 55.

**Nota** Per informazioni sulle **anomalie della batteria**, vedere ["Avvertenza batteria in esaurimento"](#) a pagina 73 e ["Guasto alla batteria"](#) a pagina 73.


## Anomalie tecniche irrecuperabili

Quando il monitor rileva un'anomalia tecnica irrecuperabile associata all'apparecchio, esegue quanto descritto di seguito.

- Visualizza un codice guasto nella finestra SIS e disattiva il display di tutte le altre finestre.
- Interrompe il monitoraggio del paziente.
- Ferma la pompa ed apre la valvola dell'aria.
- Attiva il relè chiamata infermiere (se collegato).
- Riproduce un segnale acustico.
- Si ferma non appena viene premuto  o dopo un minuto.

## Risposta

Per le anomalie tecniche recuperabile e irrecuperabile, eseguire quanto descritto di seguito.

1. Premere  per tacitare immediatamente il segnale acustico di anomalia.
2. Stabilire la causa del problema e porvi rimedio.

# Indicatori di allarme

Segue la descrizione degli indicatori di allarme del monitor.

Evento	Indicatore acustico	Indicatore visivo
<b>Allarme associato al paziente</b>	Tre brevi segnali acustici in rapida successione, seguiti da un breve silenzio, e quindi due brevi segnali acustici in rapida successione, seguiti da un lungo silenzio; il segnale di allarme viene ripetuto fino all'intervento da parte dell'operatore.	Lampeggiamento della violazione del valore numerico. Per una violazione PAM, il monitor visualizza ripetutamente i valori numerici PAM nella finestra dei messaggi, facendoli lampeggiare.
<b>Anomalia tecnica, irrecuperabile</b>	Tre segnali acustici brevi in rapida successione, seguiti da un breve silenzio, e quindi due segnali acustici brevi in rapida successione, seguiti da un lungo silenzio; il segnale di allarme viene ripetuto per un minuto o fino alla disattivazione dell'alimentazione.	Lampeggiamento della violazione del valore per un minuto o fino alla disattivazione dell'alimentazione.
<b>Errore</b>	Due segnali acustici brevi	Visualizzazione continua del codice guasto nella finestra appropriata.
<b>Anomalia tecnica, recuperabile, NIBP</b>	Due segnali acustici brevi	Visualizzazione continua del codice guasto nella finestra appropriata.
<b>Anomalia tecnica, recuperabile, SpO<sub>2</sub>, dopo lettura valida</b>	Due segnali acustici brevi	Lampeggiamento dei valori delle ultime SpO <sub>2</sub> e frequenza del polso, seguito in alcuni casi da un segnale di allarme associato al paziente.



**Attenzione** Gli utenti devono controllare la funzione di allarme acustico a ogni utilizzo di VSM 300. Durante il normale ciclo di accensione, subito dopo il completamento dell'autotest vengono emessi due segnali acustici. Se ciò non si verifica, l'audio non funziona correttamente. Rimuovere il dispositivo dal servizio e contattare Welch Allyn.

In caso di mancata emissione dell'allarme acustico, il medico potrebbe accorgersi in ritardo di una situazione di allarme legata alle seguenti condizioni: 1) ipotensione o ipertensione, 2) basso livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO<sub>2</sub>), 3) frequenza cardiaca bassa o alta, 4) altre condizioni di allarme derivanti dal mancato monitoraggio del paziente (ad esempio, in caso di disattivazione del sensore). Tale ritardo può essere causa di lesioni al paziente.

## Impostazione degli allarmi

Nel corso del monitoraggio del paziente, un allarme si verifica quando la misurazione non rientra nel limite di allarme programmato. È possibile impostare o disattivare gli allarmi per i segni vitali riportati di seguito.


- Sistolica massima e sistolica minima
- Diastolica massima e diastolica minima
- Frequenza del polso massima e frequenza del polso minima
- SpO<sub>2</sub> massima e SpO<sub>2</sub> minima
- PAM massima e PAM minima

**Nota** Per la sicurezza dei pazienti, tutti gli allarmi vengono ripristinati ai valori predefiniti dalla casa costruttrice ogniqualvolta viene cambiato il tipo di paziente. Ciò significa che occorre accettare i limiti di allarme predefiniti o impostare dei nuovi limiti ad ogni modifica del tipo di paziente (👤, 👤 o 👤).




L'allarme "max." per ogni segno vitale è sempre superiore all'allarme "min." per lo stesso segno vitale. Ad esempio, il limite di allarme per la pressione sistolica massima è sempre più alto del limite di allarme per la pressione sistolica minima.

Una lettura che raggiunga esattamente la soglia di allarme senza superarla non viene riconosciuta come condizione di allarme.

Impostare gli allarmi per la pressione sanguigna sistolica e per quella diastolica, la frequenza del polso e l'SpO<sub>2</sub> conformemente a quanto indicato di seguito.

1. Premere .

  - Tutte le finestre di visualizzazione sono vuote, eccetto la finestra dei messaggi e la finestra SIS.
  - Nella finestra dei messaggi è visualizzato **ALLARME MAX**.
  - La finestra SIS visualizza l'attuale impostazione di allarme per il limite superiore della pressione sanguigna sistolica. Questa impostazione è un valore numerico della pressione sanguigna oppure è "-", ad indicare che non è stato impostato alcun allarme per il segno vitale selezionato.

2. Per il segno vitale selezionato, eseguire una delle seguenti azioni.
  - Lasciare invariato il limite oppure
  - premere  o  in base alle proprie esigenze per cambiare il limite con un altro valore oppure con "-" per disattivare l'allarme.
3. Premere  per accettare il limite di allarme visualizzato e passare al segno vitale successivo.

La visualizzazione si sposta alla finestra successiva (ad esempio, da **SIS MAX** a **SIS MIN** o da **SIS MIN** a **DIA MAX**).

4. Per continuare la modifica dei limiti di allarme, ripetere da [punto 2](#); per ritornare al normale funzionamento, *non eseguire alcuna operazione* per 10 secondi.


Impostazione dei limiti di allarme PAM, in caso di attivazione dell'opzione PAM

5. Continuare da [punto 3](#) scorrendo tutte le finestre di visualizzazione; ovvero, fino ad arrivare a **SpO2 MIN**.

La visualizzazione si sposta alla finestra dei messaggi, che visualizza il limite di allarme max. PAM, nel seguente modo:

**PAM ↑ XXX mmHg o PAM ↑ XXX kPa**

**PAM ↓ XXX mmHg o PAM ↓ XXX kPa**

6. Modificare o accettare il limite di allarme max. PAM seguendo la procedura descritta sopra (da [punto 2](#)).
7. Premere  per andare al limite di allarme min. PAM.
8. Cambiare o accettare il limite di allarme min. PAM.

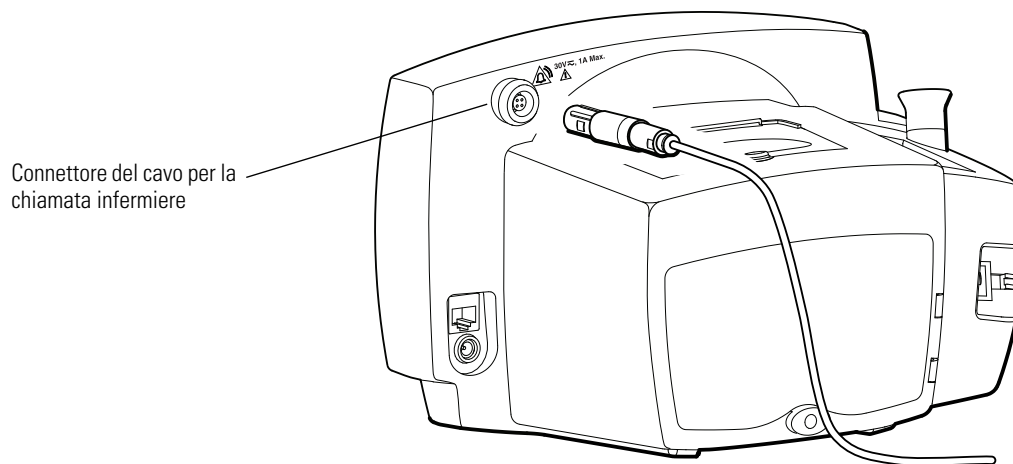
Di seguito sono indicati gli intervalli dei limiti di allarme max. e min. per ciascun segno vitale.

Limiti di allarme per i segni di allarme			
Segno vitale	Limite min. (predefinito)	Limite max. (predefinito)	Risoluzione
<b>Sistolica (mmHg)</b>			
Paziente neonatale	30 - 110 (50)	35 - 115 (100)	5 mmHg (0,5 kPa)
Paziente pediatrico	35 - 150 (75)	40 - 155 (145)	5 mmHg (0,5 kPa)
Paziente adulto	35 - 250 (75)	40 - 255 (220)	5 mmHg (0,5 kPa)
<b>Diastolica (mmHg)</b>			
Paziente neonatale	15 - 95 (30)	20 - 100 (70)	5 mmHg (0,5 kPa)
Paziente pediatrico	20 - 120 (35)	25 - 125 (100)	5 mmHg (0,5 kPa)
Paziente adulto	25 - 225 (35)	30 - 230 (110)	5 mmHg (0,5 kPa)
<b>Pressione arteriosa media (mmHg)</b>			
Paziente neonatale	15 - 100 (35)	20 - 105 (80)	5 mmHg (0,5 kPa)
Paziente pediatrico	20 - 130 (50)	25 - 135 (110)	5 mmHg (0,5 kPa)
Paziente adulto	25 - 245 (50)	30 - 250 (120)	5 mmHg (0,5 kPa)
<b>Frequenza del polso (battiti al minuto)</b>			
Paziente neonatale	35 - 210 (100)	40 - 215 (200)	5 bpm
Paziente pediatrico	35 - 210 (50)	40 - 215 (150)	5 bpm
Paziente adulto	35 - 210 (50)	40 - 215 (120)	5 bpm
<b>SpO<sub>2</sub> (%)</b>			
Paziente neonatale	50 - 98 (80)	51 - 99 (95)	1%
Paziente pediatrico	50 - 98 (85)	51 - 99 (---)	1%
Paziente adulto	50 - 98 (85)	51 - 99 (---)	1%



## Chiamata infermiere

Il monitor può essere collegato ad un sistema di chiamata infermiere attraverso un cavo personalizzato collegato al connettore di chiamata infermiere. Quando è collegato e funzionante, il monitor informa immediatamente il sistema di chiamata infermiere in caso di allarme associato al paziente.



Per collegare il monitor al sistema di chiamata infermiere, occorre disporre di un cavo (codice articolo Welch Allyn 008-0634-XX o di un tipo equivalente) che sia stato adattato al sistema di chiamata infermiere in uso. Questo cavo può essere costruito o personalizzato dal reparto di ingegneria biomedica o da un'altra risorsa tecnica appropriata, attenendosi alla specifica descritta a ["Specifiche di chiamata infermiere"](#) a pagina 83.



**AVVERTENZA** Anche se l'opzione di chiamata infermiere attiva la notifica remota di una condizione di allarme, non è da intendersi come una sostituzione alla supervisione presso il letto del paziente da parte di medici esperti.

**Nota** Quando si verifica un allarme associato al paziente, premendo si tacita il segnale acustico di allarme del monitor e dell'allarme di chiamata infermiere per 90 secondi, tuttavia non si disattiva l'indicatore di allarme visivo presente sul monitor.

## Codici guasto

Codice guasto	Descrizione
<b>Pressione sanguigna</b>	
<b>C01</b>	Il ciclo di misurazioni NIBP è stato cancellato dall'operatore.
<b>C02</b>	Calibrazione impossibile. Il bracciale è stato spostato in modo eccessivo durante la calibrazione oppure l'unità NIBP non funziona.
<b>C03</b>	Tempo di gonfiamento troppo rapido. Assicurarsi che non sia presente una strozzatura nel tubo. Verificare l'impostazione del tipo di paziente.
<b>C04</b>	Tempo di gonfiamento troppo lento. Assicurarsi che non sia presente una perdita nel tubo. Verificare l'impostazione del tipo di paziente.
<b>C05</b>	Rumore eccessivo o perdita d'aria. Controllare la condizione del paziente, la posizione del bracciale e il collegamento. Limitare i movimenti del paziente.
<b>C06</b>	Misurazione della pressione al di fuori dei limiti del monitor.
<b>C10</b>	La pressione del bracciale è troppo alta. Controllare la condizione del paziente.
<b>SpO<sub>2</sub></b>	
- -	Problema sensore. Controllare la condizione del paziente e la posizione/il contatto del sensore. Verificare l'SpO <sub>2</sub> e la frequenza del polso utilizzando un metodo alternativo.
<b>C7</b>	Il sensore è rotto, manca o è incompatibile. Contattare l'assistenza tecnica.
<b>Temperatura</b>	
<b>C20</b>	La sonda è rotta, manca oppure è mancante il pozzetto della sonda. Contattare l'assistenza tecnica.
<b>P</b>	La sonda di temperatura ha uno scarso contatto col tessuto.
<b>Generali</b>	
<b>C13</b>	Guasto alla batteria. Utilizzare l'alimentatore in c.a.
<b>E20-E50</b>	Guasto interno. Contattare l'assistenza tecnica.








## 5

## Esame dei dati del paziente

---

È possibile esaminare i dati memorizzati del paziente visualizzandoli sul monitor o stampandoli.

### Visualizzazione dei dati memorizzati del paziente



1. Premere  per visualizzare la serie più recente di dati relativi ai segni vitali del paziente.
  - Il monitor interrompe la visualizzazione dinamica di ogni misurazione attuale del segno vitale.
  - Il messaggio **LETTURA** appare nella finestra dei messaggi, con un numero sequenza della serie di dati e l'ora della lettura visualizzata. (Durante l'esame dei dati del paziente, se è attivata la PAM, questa visualizzazione si alterna ogni due secondi con la visualizzazione della pressione sanguigna media.)
2. Premere  o  per scorrere i set di dati memorizzati relativi alla misurazione. (Il monitor memorizza 99 cicli di misurazione.)
3. Per ripristinare il normale funzionamento, premere un tasto qualsiasi eccetto  o . Se si preme un tasto funzione (come ad esempio, ) , il monitor ripristina il funzionamento normale con quella funzione () attivata.

### Stampa dei dati del paziente

**Nota** Le informazioni presenti in questa sezione sono relative solo ai monitor configurati con la stampante termica opzionale.

La stampante fornisce un modo per visualizzare e salvare i dati dei segni vitali del paziente. Può essere configurata per stampare tutti i dati memorizzati come un unico batch o per stampare un flusso continuo di dati man mano che i dati vengono registrati nella memoria. (Per maggiori informazioni, consultare ["Selezione della stampa a flusso o batch"](#) a pagina 30.)




## Avvio ed interruzione della stampa


- Se il monitor non sta stampando, premere  per avviare la stampa.
- Se il monitor sta stampando, premere  per interrompere la stampa. (Se il monitor è impostato sulla stampa Flusso, la stampante stampa un piè di pagina prima di fermarsi.)

**Nota** Il pulsante di stampa non è attivato durante il ciclo NIBP o durante l'anomalia tecnica irrecuperabile.


## Stampa batch

Dopo che un paziente è stato monitorato di continuo per un determinato periodo, il medico può usare la funzione di stampa **batch** per stampare tutte le misurazioni conservate nella memoria del monitor per un determinato periodo di monitoraggio.

Quando il monitor è configurato per la stampa batch, e mentre è nella normale modalità di funzionamento, premere  per stampare tutte le letture memorizzate (fino a 99 cicli), dal ciclo di misurazione meno recente in poi. Il messaggio **STAMPA** viene visualizzato durante la stampa batch, e tutti i comandi del monitor, eccetto  e , sono disattivati. La stampa batch continua fino al verificarsi di uno degli eventi descritti di seguito.


- Sono stati stampati tutti i dati memorizzati.
- Viene nuovamente premuto .
- Si è verificato un guasto alla batteria.
- È stata rilevata una condizione di anomalia tecnica irrecuperabile.


In uno qualsiasi di questi casi, la stampa si ferma immediatamente.

**Nota** Se il monitor viene configurato per la stampa **Flusso** ma la stampa è disattivata, tenendo premuto per 3 secondi  si avvia immediatamente un processo di stampa **Batch**. Quando questo processo di stampa **Batch** termina, il monitor viene ancora configurato per la stampa **Flusso**.

## Stampa flusso

In alternativa, un medico può scegliere di stampare un **flusso** continuo di segni vitali, in cui le informazioni della misurazione vengono stampate non appena sono registrati i risultati di ciascun ciclo.

Quando il monitor viene configurato per la stampa flusso, e mentre si trova nella modalità di funzionamento normale, premere  per avviare immediatamente la stampa flusso. La stampa flusso continua fino al verificarsi di uno degli eventi descritti di seguito.

- Viene premuto nuovamente ; il monitor stampa un registro errori (se si è verificato un errore) ed un piè di pagina, quindi interrompe la stampa.
- È stata rilevata una condizione di anomalia tecnica irreversibile; la stampa termina immediatamente.
- È stata rilevata una condizione di guasto alla batteria. La stampa viene sospesa finché continua il guasto alla batteria; se l'alimentatore in c.a. è collegato prima dell'arresto del monitor, la stampa riprende.

## Uscita stampante

Il report standard della stampante è composto da un'intestazione, dalle informazioni del paziente, dai dati del paziente (intestazione tabella, data, ora, valori limite e flag di allarme, e letture della misurazione), da una legenda degli errori e da un piè di pagina. Se il monitor riceve una richiesta di stampa e non sono disponibili dati, stampa solo l'intestazione ed il piè di pagina.

### Intestazione

<b>Welch Allyn®</b>
<b>Monitor dei segni vitali</b>

### Informazioni del paziente

<b>Nome paziente:</b>	_____
<b>Codice paz:</b>	_____
<b>Medico:</b>	_____
<b>Procedura:</b>	_____
<b>Commenti:</b>	_____
	_____
	_____

### Dati del paziente

Il contenuto del blocco Dati del paziente riflette la configurazione del monitor; ovvero, con o senza l'opzione SpO<sub>2</sub> e con o senza l'opzione temperatura.

Per un ciclo singolo, vengono stampati tutti i dati eccetto la temperatura su un'unica riga; i dati relativi alla temperatura, se esistenti, vengono stampati su una seconda riga. Se non sono disponibili i dati per un unico parametro, non viene stampato nulla nello spazio previsto per tale parametro.

I dati del paziente sono visualizzati in una tabella composta dall'intestazione tabella, dalla data attuale e da una serie di righe di dati relativi ai segni vitali.

## Intestazione della tabella

L'intestazione della tabella contiene alcuni o tutti i seguenti titoli (in funzione della configurazione del monitor).

```
| Ora Sis Dia PAM RC SpO2 |
| --- mmHg --- BPM % |
| ----- |
oppure
| Ora Sis Dia PAM RC SpO2 |
| --- kPa --- BPM % |
| ----- |
oppure
| Ora Sis Dia PAM RC |
| --- kPa --- BPM % |
| ----- |
oppure
| Ora Sis Dia PAM RC |
| --- mmHg --- BPM % |
| ----- |
```

## Data

```
| GG-MMM-AAAA |
```

## Tempo

Il tempo di registrazione viene stampato per ciascun record, nel formato **hh:mm** (viene utilizzato il sistema a 24 ore), all'inizio della prima riga del record.

Nella figura seguente, il primo record (21:45) contiene le letture delle pressioni sistolica e diastolica, della PAM, della frequenza del polso e dell'SpO2; il secondo record (21:52) contiene le letture delle pressioni sistolica e diastolica, della PAM, della frequenza del polso e della temperatura; e il terzo record (22:12) contiene solo la lettura della temperatura. Quando la temperatura è l'unico segno vitale registrato, il tempo viene stampato sulla stessa riga della lettura della temperatura.

```
| Ora Sis Dia PAM RC SpO2 |
| --- mmHg --- BPM % |
| ----- |
| 21:45 125 69↓ 90 72 98 |
| 21:52 125 69↓ 90 72 98 |
| Temp 99.2F NOR/ORL |
| 22:12 Temp 110.0F↑ NOR/ORL |
```

## Flag di limite e di allarme

I caratteri flag (↑ e ↓) indicano un valore che non rientra nei limiti definiti o viola la soglia di allarme programmata. Nella figura precedente, 69↓ indica un valore della pressione diastolica al di sotto del limite di allarme programmato, e 110.0F↑ indica un valore della temperatura superiore al limite di misurazione della temperatura del monitor.

## Temperatura

L'annotazione riguardante la temperatura include le informazioni sul tipo e sulla posizione della misurazione, e può includere l'annotazione dell'errore.

Tipo			
F	Fahrenheit	C	Celsius
NOR	Normale (predittiva)	MON	Monitorata
Posizione			
OrL	Per via orale	(Sonda per uso orale)	
AP	Per via ascellare pediatriche	(Sonda per uso orale)	
AA	Per via ascellare adulti	(Sonda per uso orale)	
rET	Per via rettale	(Sonda per uso rettale)	
Errore			
(P)	Perdita del contatto del tessuto durante il periodo di misurazione. La misurazione della temperatura visualizzata non è necessariamente accurata.		
C20	Sonda della temperatura danneggiata o mancante.		

## Frequenza del polso

L'annotazione della frequenza del polso non comprende le informazioni relative al guasto.

## SpO<sub>2</sub>

L'annotazione sull'SpO<sub>2</sub> può includere le informazioni relative al guasto.

<b>C7</b>	Malfunzionamento sensore.
--	Guasto del sensore.

## NIBP

L'annotazione dell'NIBP può includere le informazioni relative al guasto.

---

C01	Il ciclo di misurazioni è stato cancellato dall'operatore.
C02	Calibrazione impossibile.
C03	Gonfiamento bracciale troppo rapido.
C04	Tempo di gonfiamento bracciale eccessivo.
C05	Rumore eccessivo o perdita d'aria.
C06	Misurazione fuori dai valori limite del monitor.
C10	Sovrapressione del bracciale.

---

## Legenda degli errori

Se appare un indicatore di guasto nei dati stampati, il monitor stampa una legenda dei guasti. La legenda dei guasti contiene un'intestazione di due righe seguita da una breve spiegazione di ciascun tipo di guasto rilevato nei dati. La seguente figura mostra la legenda dei guasti per un batch di dati contenente almeno un guasto di temperatura **(P)**, almeno un guasto NIBP **C04** e nessun altro guasto.

```

| Codici guasto:                |
| ----- |
| (P) Perdita del contatto col |
| tessuto cutaneo           |
| C04 Tempo di gonfiamento   |
| eccessivo                 |
|                               |

```

## Piè di pagina

Il piè di pagina stampato è composto da una riga contenente il numero di serie del monitor, una riga contenente la versione software del monitor, due righe di separazione e quattro righe vuote:

```

| Unità S/N: JA736455        |
| Ver s/w: 1.00.00 00005    |
| ----- |
| ----- |
|         |
|         |
|         |
|         |

```




## Cancellazione dei dati del paziente

Tutti i dati dei segni vitali del paziente vengono cancellati quando il monitor viene spento o quando si modificano le impostazioni dell'ora e della data. È altresì possibile cancellare i dati in un momento qualsiasi durante il normale funzionamento del monitor.






### Cancellazione dei dati prima della modifica della data e dell'ora

Se si cerca di modificare la data e l'ora, il monitor richiede di confermare se si intendono cancellare tutti i dati memorizzati del paziente.

**Nota** Non è possibile modificare la data e l'ora senza cancellare tutti i dati memorizzati dei pazienti.

Per cancellare i dati del paziente, premere ; il monitor cancella i dati e attiva la regolazione della data e dell'ora. (Per informazioni sulla modifica delle impostazioni dell'ora e della data, consultare "[Modifica dell'ora e della data](#)" a pagina 23.)


### Cancellazione dei dati durante il normale funzionamento

Per cancellare i dati del paziente durante il normale funzionamento, tenere premuto per tre secondi . Quando il monitor richiede la conferma, premere  per confermare o  per annullare l'operazione. Quando la cancellazione è terminata, il monitor ripristina automaticamente il normale funzionamento. Se si annulla la cancellazione, è possibile premere un tasto qualsiasi che non sia  o  per ripristinare il normale funzionamento.

## Sostituzione della carta della stampante

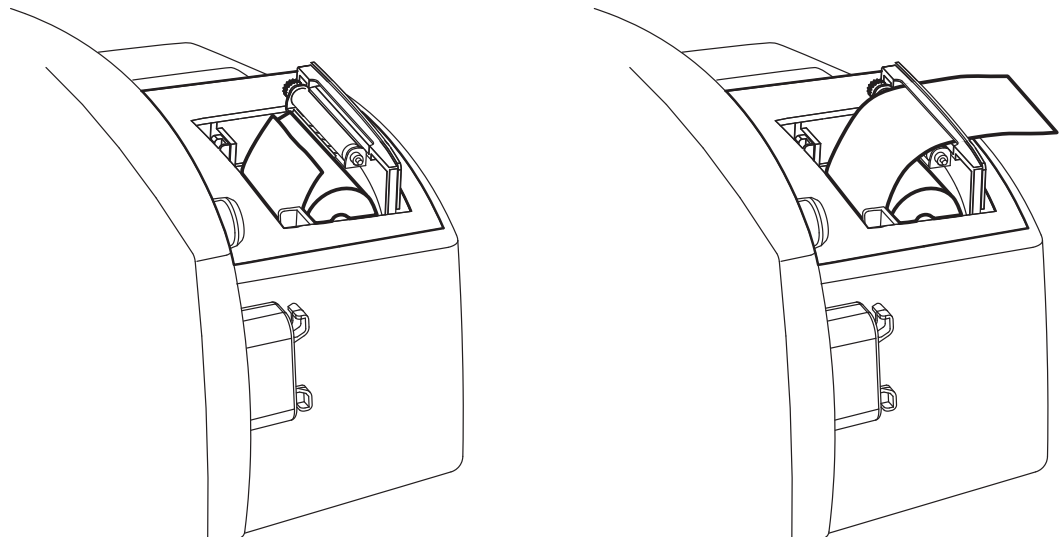
**Nota** Utilizzare esclusivamente carta termica fornita da Welch Allyn (codice prodotto 7052-25). L'uso di una carta diversa può compromettere le prestazioni della stampante.

Per sostituire la carta della stampante, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Premere  per aprire lo sportello della stampante.
2. Inserire un nuovo rotolo di carta.

**Nota** Il rotolo di carta deve essere installato come mostrato nella seguente figura. Se il rotolo di carta non è installato correttamente, la stampante non stampa.

3. Infilare l'estremità del rotolo sopra il rullo e attraverso l'alloggiamento nello sportello della stampante, come mostrato.



4. Con una mano, tirare leggermente la carta per raccogliere eventuali allentamenti. Con l'altra mano, chiudere lo sportello della stampante spingendolo fino a quando scatta in posizione.

**Nota** Assicurarsi che la carta non rimanga incastrata nello sportello della stampante.

# 6

## Manutenzione operatore

---

### Pulizia

Pulire il monitor con un panno **leggermente inumidito** con acqua calda ed un detergente delicato o un disinfettante che non lasci macchie, opportunamente diluito.



**Attenzione** Non bagnare mai il monitor né immergerlo in liquidi di nessun tipo. Non far entrare acqua nelle porte di connessione.

**Attenzione** Non immergere in liquidi i componenti del monitor, come ad esempio il tubo o il bracciale NIBP, la sonda della temperatura o il sensore di SpO<sub>2</sub>.

Pulire la sonda della temperatura con un panno inumidito con alcol, acqua calda, o un disinfettante che non lasci macchie, opportunamente diluito.

Il tubo NIBP e i bracciali riutilizzabili: Seguire le istruzioni del produttore.

Il sensore di SpO<sub>2</sub>: Seguire le istruzioni del produttore.

### Conservazione

Per la massima durata del monitor e prestazioni ottimali, conservare il monitor a temperatura ambiente in un luogo asciutto.

Per una conservazione prolungata, conservare il monitor nel contenitore originale o in un altro contenitore a prova di polvere.

Prima di immagazzinare il monitor, assicurarsi che sia presente della carta nella stampante.

## Riutilizzo



Non smaltire questo prodotto con i normali rifiuti. Approntare il prodotto per il riutilizzo oppure smaltirlo in modo differenziato, in base a quanto stabilito dalla Direttiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

**Nota** Se il prodotto è contaminato, tale direttiva non viene applicata.

Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento, visitare il sito Web all'indirizzo [www.welchallyn.com/weee](http://www.welchallyn.com/weee) oppure contattare l'assistenza clienti Welch Allyn al numero +39 02 69682425.


# 7


## Riferimento

---

### Funzionamento a batteria

#### Avvertenza batteria in esaurimento


Se la carica della batteria è in esaurimento, viene riprodotto un segnale di avvertimento e l'indicatore Batteria in esaurimento  lampeggia di continuo.



Dal momento in cui  si illumina, la batteria ha una carica residua sufficiente per eseguire almeno una delle seguenti operazioni nell'ora successiva:

- 20 cicli NIBP;
- 30 minuti di monitoraggio dell'SpO<sub>2</sub>;
- 20 determinazioni predittive della temperatura;
- un'unica stampa di 99 serie di dati memorizzati.

Per evitare l'arresto del monitor dovuto ad un guasto alla batteria, collegare l'alimentatore in c.a.

#### Guasto alla batteria

Se il monitor continua a funzionare con l'alimentazione a batteria dopo che  si è acceso, prima o poi la batteria smette di funzionare. Il guasto della batteria è indicato da quanto descritto di seguito.

-  lampeggia di continuo.
- Viene ripetuto di continuo un breve segnale acustico. Premendo  non si disattiva tale segnale.
- Appare il messaggio **BATT. IN ESAUR.** nella finestra dei messaggi.
- Viene visualizzato un codice guasto nella finestra della pressione sistolica (SIS) per 10 secondi, e quindi tutte le visualizzazioni del monitor sono vuote.
- Viene riprodotto solo una volta un segnale di guasto (2 segnali acustici brevi).

Il guasto alla batteria provoca anche la sospensione immediata di tutte le funzioni di monitoraggio e di stampa.

Se il carica batteria non è collegato, il monitor si spegne 15 minuti dopo che la batteria in esaurimento ha raggiunto il livello di guasto.

In caso di selezione della misurazione non invasiva automatica della pressione sanguigna, e di collegamento del carica batteria prima dello spegnimento del monitor, i cicli di misurazione automatica riprendono non appena la tensione della batteria supera la soglia di guasto.

## Sostituzione delle batterie

Quando la batteria è scarica, sostituirla con una identica batteria Welch Allyn (codice riordino 501-0015-XX).




**Attenzione** Riciclare sempre le batterie in conformità alle normative nazionali. Provvedere al loro smaltimento in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari.

## Specifiche del monitor

Il monitor è un dispositivo per terapia non critica di classe II secondo la classificazione della FDA e, conformemente alla direttiva del consiglio 93/42/CEE, allegato IX, un dispositivo di classe IIB.

## Specifiche prestazionali

Caratteristica	Specifica	
	<b>Generali</b>	
Recupero dalla scarica del defibrillatore	In base allo standard IEC 60606-2-30:1999(E), il monitor dovrà ritornare al funzionamento normale entro 1 minuto dalla scarica di un defibrillatore cardiaco (tempo di recupero effettivo = 0 secondi).	
	 <b>AVVERTENZA</b> Scollegare sempre il cavo del sensore SpO <sub>2</sub> dal monitor prima di defibrillare il paziente.	
	<b>NIBP</b>	
Intervallo di pressione del bracciale	Da 0 a 300 mmHg (da 0 a 40 kPa)	
Gonfiamento iniziale del bracciale	Adulto	160 mmHg (21,3 kPa)
	Pediatrico	120 mmHg (16 kPa)
Valore predefinito di fabbrica	Neonato	90 mmHg (12 kPa)
Accuratezza pressione arteriosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>La misurazione della pressione arteriosa soddisfa o supera i requisiti della normativa ANSI/AAMI SP10 2002, relativa agli sfigmomanometri manuali, elettronici o automatici.</li> <li>L'accuratezza della pressione arteriosa viene convalidata per la misurazione della pressione eseguita esclusivamente sull'avambraccio, con il paziente seduto.</li> <li>Per gli adulti e per i bambini di età superiore a 3 anni, la pressione arteriosa viene convalidata in base alle letture manuali auscultatorie.</li> <li>Per i bambini di età inferiore a 3 anni, la pressione arteriosa viene convalidata in base alle letture intraarteriose.</li> </ul>	
Tempo di accertamento della pressione arteriosa	Normalmente, 20-45 secondi; 165 secondi, al massimo.	
Cutoff sovrappressione	Da 295 a 330 mmHg (da 39,3 a 44 kPa)	
Intervallo sistolico	Adulto	Da 30 a 260 mmHg (da 4 a 34,5 kPa)
	Pediatrico	Da 30 a 160 mmHg (da 4 a 21,3 kPa)
	Neonato	Da 25 a 120 mmHg (da 3,3 a 16 kPa)
Intervallo diastolico	Adulto	Da 20 a 235 mmHg (da 2,7 a 31,3 kPa)
	Pediatrico	Da 15 a 130 mmHg (da 2 a 17,3 kPa)
	Neonato	Da 10 a 105 mmHg (da 1,3 a 14 kPa)
PAM	Adulto	Da 20 a 255 mmHg (da 2,7 a 30 kPa)
	Pediatrico	Da 15 a 140 mmHg (da 2 a 18,7 kPa)
	Neonato	Da 10 a 110 mmHg (da 1,3 a 14,7 kPa)
Intervallo della frequenza del polso	Da 30 a 220 bpm	
Precisione della frequenza del polso	± 3 bpm o 3%	

**Nota** Le specifiche NIBP sono testate da Welch Allyn utilizzando il tester per monitor NIBP pompa BP BIO-TEK.

Caratteristica	Specifica	Temperatura		Note
Intervallo di misurazione della temperatura	Da 80 °F a 110 °F Da 26,7 °C a 43,3 °C			
Accuratezza della calibrazione della temperatura	± 0.2 °F (± 0.1 °C); soddisfa o supera i requisiti della normativa ASTM E1112-00; EN12470-3:2000			
Tempo di accertamento della temperatura	Predittiva (tipica)	Per via orale	4 secondi	
		Per via ascellare	10 secondi	
		Per via rettale	15 secondi	
SpO <sub>2</sub>				
Caratteristica	Specifica	Note		
		Tutti i sensori presentano un intervallo di misurazione di 70% - 100%. SpO2 conforme a EN ISO 9919:2005.		
Intervallo della frequenza del polso	Da 25 a 240 bpm			
Precisione della frequenza del polso	± 3 bpm	Nessun movimento		
	± 5 bpm	Movimento		
	± 3 cifre	Perfusione bassa		
Accuratezza SpO <sub>2</sub>	70-100% ± 2 cifre	Paziente adulto e paziente pediatrico		
	70-100% ± 3 cifre	Neonatale		
Intervallo della saturazione della pulsossimetria (SpO <sub>2</sub> )	Da 1% a 100%			
Soppressione delle interferenze da elettrochirurgia	Sì			
Compatibilità del sensore	Per un elenco completo dei sensori compatibili, visitare il sito Web <a href="http://www.welchallyn.com">www.welchallyn.com</a> .			
Masimo	Per la conformità di sonde e sensori a EN ISO 9919:2005, consultare le istruzioni per l'uso di Masimo.			
Luci del sensore (Masimo)	≤ 15 mW a 50 mA, pulsata			
Lunghezza d'onda del rosso	660 nm			
Lunghezza d'onda del rosso (pinza per dito del piede)	663 nm			
Lunghezza d'onda dell'infrarosso	905 nm			
Lunghezza d'onda dell'infrarosso (pinza per dito del piede)	880 nm			

**Nota** Le specifiche SpO<sub>2</sub> sono pubblicate dal produttore del componente SpO<sub>2</sub> e sono testate da Welch Allyn utilizzando il simulatore SpO<sub>2</sub> BIO-TEK Index 2.



## Specifiche fisiche

Caratteristica	Specifica	
Dimensioni		
altezza	6,6 pollici	16,8 cm
larghezza	10,0 pollici	25,4 cm
profondità	6,0 pollici	15,2 cm
Peso	Circa 2,4 kg	5,4 libbre
Colore, sonda della temperatura		
Per via orale/ascellare	Blu	
Per via rettale	Rosso	

Caratteristica	Specifica
Supporto	Autoportante su piedini di gomma Montabile (con accessori disponibili) nel seguente modo: supporto portaflebo supporto mobile parete
Portabilità	Impugnatura per il trasporto Montato su supporto portaflebo o mobile, può essere spostato da paziente a paziente

## Specifiche elettriche

### Requisiti di alimentazione

L'alimentatore in c.a. di isolamento per uso medico, che è collegato all'alimentazione in c.a., deve erogare 8 volt in c.c. e 0,74 ampere.

### Batteria

Il monitor utilizza una batteria al piombo sigillata 6V 4Ah (in dotazione) con capacità di ricarica esterna.

La batteria si carica ad almeno il 90% della sua capacità in 12 ore. L'alimentatore in c.a., quando collegato, aziona contemporaneamente il monitor e carica la batteria; carica più rapidamente la batteria se non funziona contemporaneamente al monitor.

Utilizzando un monitor nuovo, con una batteria completamente carica, è possibile azionare il monitor di continuo per almeno 8 ore per il monitoraggio non invasivo della pressione sanguigna di un paziente adulto, ad intervalli di 3 minuti, con monitoraggio contemporaneo e continuo dei valori della temperatura e dell'SpO<sub>2</sub>.

In breve, una batteria nuova, completamente carica, supporta almeno 165 letture NIBP di pazienti adulti ad intervalli di 3 minuti pur monitorando e visualizzando contemporaneamente e di continuo i valori della temperatura e dell'SpO<sub>2</sub>.

### Corrente di dispersione

Per ottenere il massimo isolamento elettrico del paziente, collegare un computer al monitor solo quando il monitor non è collegato al paziente o quando il computer si trova al di fuori del campo del paziente e viene alimentato a batteria.

## Specifiche ambientali

### Compatibilità elettromagnetica

Il monitor è conforme a tutte le normative applicabili e richieste in materia di interferenze elettromagnetiche.

- Di regola, non influisce sulle apparecchiature e sui dispositivi vicini.
- Di regola, non subisce interferenze da parte di apparecchiature e dispositivi vicini.
- È sicuro azionare il monitor in presenza di apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza.
- Tuttavia, è buona pratica evitare di usare il monitor tenendolo troppo vicino ad altre apparecchiature.

---

#### **Guida e dichiarazione del produttore—emissioni elettromagnetiche**

---

Il monitor dei segni vitali 300 Series deve essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del monitor deve assicurarsi che sia utilizzato in tale ambiente.

---

<b>Test delle emissioni</b>	<b>Conformità</b>	<b>Ambiente elettromagnetico—guida</b>
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	Il monitor dei segni vitali 300 Series utilizza l'energia RF unicamente per la sua funziona interna. Di conseguenza, le emissioni RF sono molto basse e non provocano alcuna interferenza con le apparecchiature elettroniche vicine.
Emissioni RF CISPR 11	Classe B	Il monitor dei segni vitali 300 Series è adatto per l'uso in qualsiasi ambiente, inclusi gli ambienti domestici e quelli direttamente connessi alla rete pubblica di alimentazione a bassa tensione che fornisce elettricità agli edifici adibiti ad uso domestico.
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Classe A	
Variazioni di tensione/sfarfallio IEC 61000-3-3	È conforme	

---


**Guida e dichiarazione del produttore—immunità elettromagnetica**

Il monitor dei segni vitali 300 Series deve essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del monitor deve assicurarsi che sia utilizzato in tale ambiente.

<b>Test di immunità</b>	<b>Livello di misura IEC 60601</b>	<b>Livello conformità</b>	<b>Ambiente elettromagnetico—guida</b>
Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contatto ±8 kV aria	±6 kV contatto ±8 kV aria	I pavimenti dovrebbero essere in legno, cemento o ceramica. Se il materiale è sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transitore elettrico veloce/burst IEC 61000-4-4	±2 kV per alimentatori ±1 kV per linee di ingresso/uscita	±2 kV per alimentatori ±1 kV per linee di ingresso/uscita	La qualità dell'alimentazione deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Picco di tensione IEC 61000-4-5	±1 kV modalità differenziale ±2 kV modalità comune	±1 kV modalità differenziale ±2 kV modalità comune	La qualità dell'alimentazione deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione IEC 61000-4-11	<5% $U_t$ (>95% di buco in $U_t$ ) per un ciclo di 0,5 40% $U_t$ (60% di buco in $U_t$ ) per 5 cicli 70% $U_t$ (30% di buco in $U_t$ ) per 25 cicli <5% $U_t$ (>95% di buco in $U_t$ ) per 5 sec	<5% $U_t$ (>95% di buco in $U_t$ ) per un ciclo di 0,5 40% $U_t$ (60% di buco in $U_t$ ) per 5 cicli 70% $U_t$ (30% di buco in $U_t$ ) per 25 cicli <5% $U_t$ (>95% di buco in $U_t$ ) per 5 sec	La qualità dell'alimentazione deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utente del monitor VSM 300 Series richiede il funzionamento continuo durante l'interruzione dell'alimentazione, si consiglia di utilizzare un gruppo di continuità o una batteria per alimentare il monitor.
Campo magnetico della frequenza industriale (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	I campi magnetici della frequenza industriale devono essere ai livelli caratteristici di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Nota	$U_t$ è la tensione c.a. prima dell'applicazione del livello di misura.		

### Guida e dichiarazione del produttore—immunità elettromagnetica

Il monitor di VSM 300 Series deve essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del monitor deve assicurarsi che sia utilizzato in tale ambiente.

Test di immunità	Livello di misura IEC 60601	Livello conformità	Ambiente elettromagnetico—guida
RF condotto IEC 61000-4-6	3 V <sub>rms</sub> da 150 kHz a 80 MHz	3 V <sub>rms</sub>	La distanza delle apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili da qualsiasi parte del monitor VSM 300 Series, inclusi i cavi, deve rispettare la distanza di separazione consigliata che è stata calcolata in base all'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.  <b>Distanza di separazione consigliata</b>  $d = 1,2 \sqrt{P}$
RF irradiato IEC 61000-4-3	3 V/m da 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,2 \sqrt{P}$ da 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ da 800 MHz a 2,5 GHz  dove <b>P</b> è la potenza di uscita massima del trasmettitore in watt in base alle informazioni fornite dal produttore e <b>d</b> la distanza di separazione consigliata espressa in metri. Le intensità di campo dei trasmettitori RF fissi, in base a quanto determinato dal rilevamento di un sito elettromagnetico <sup>a</sup> , devono essere inferiori al livello di conformità in ciascuna gamma di frequenza <sup>b</sup> . Possono verificarsi delle interferenze in prossimità di apparecchiature contrassegnate con il simbolo seguente: 
Nota 1	A 80 MHz e 800 MHz, viene applicata la gamma di frequenza più elevata.		
Nota 2	Queste linee guida possono non essere applicabili a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.		
a	Le intensità di campo dei trasmettitori fissi, quali stazioni base per reti radiomobili (telefoni cellulari/ senza fili) e sistemi terrestri mobili di radiocomunicazione, radioamatori, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere calcolate con accuratezza. Per valutare l'ambiente elettromagnetico determinato dai trasmettitori RF, occorre eseguire il rilevamento di un sito elettromagnetico. Qualora l'intensità di campo rilevata nel luogo in cui il monitor dei segni vitali 300 Series viene utilizzato superi il livello di conformità RF applicabile sopra indicato, occorre osservare il monitor per verificarne il normale funzionamento. Se si nota un funzionamento anormale, può essere necessario applicare misure aggiuntive, come il riorientamento e la ridisposizione del monitor dei segni vitali 300 Series.		
b	Al di sopra della gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.		

### Distanze di separazione consigliate tra le apparecchiature di comunicazione portatili e mobili RF e il monitor dei segni vitali 300 Series

Il monitor dei segni vitali 300 Series deve essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui le interferenze RF irradiate siano controllate. Il cliente o l'utente del monitor dei segni vitali 300 Series può aiutare a prevenire l'interferenza elettromagnetica mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il monitor dei segni vitali 300 Series come consigliato di seguito, secondo la potenza di uscita massima dell'apparecchiatura di comunicazione.

Potenza di uscita nominale massima del trasmettitore W	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore m		
	da 150 kHz a 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	da 80 MHz a 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	da 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Per i trasmettitori con una potenza di uscita massima non elencata di seguito, la distanza di separazione consigliata  $d$  in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove  $P$  è la potenza di uscita massima specificata del trasmettitore in watt (w) in base alle informazioni fornite dal produttore.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, viene applicata la distanza di separazione per la gamma di frequenza più elevata.

NOTA 2 Queste linee guida possono non essere applicabili a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

### Altro specifiche ambientali

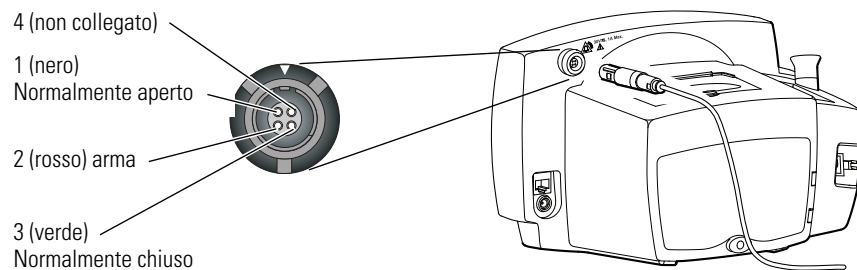
Caratteristica	Specifica
Temperatura di funzionamento	
Misurazione SpO2, NIBP, frequenza del polso e temperatura	Da +10 °C a +40 °C Da +50 °F a +104 °F
Altitudine di esercizio	Da -170 m a +4.877 m Da -557 piedi a +16.000 piedi
Altitudine di spedizione	Da -615 m a 12.300 m Da -2000 piedi a 40.000 piedi
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +50 °C Da -4 °F a +122 °F
Umidità relativa	Dal 15% al 90% (senza condensa)

## Specifiche di chiamata infermiere

---

<b>Corrente di commutazione</b>	1A max.
<b>Tensione di commutazione</b>	30 V ca/cc max.
<b>Isolamento</b>	1500 V rms
<b>Relè dell'allarme</b>	Eccitato durante l'allarme associato al paziente
<b>Cavo</b>	<p>Codice articolo Welch Allyn 008-0634-XX, personalizzato per collegare il sistema locale di chiamata infermiere.</p> <p>Proprietà del cavo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lunghezza: 3 metri (10 piedi).</li><li>• Non schermato.</li><li>• Una estremità senza terminazione (da adattare in sito).</li><li>• Una estremità terminata con un connettore che si accoppia al connettore di chiamata infermiere (illustrato di seguito) del monitor.</li></ul>

---



## Impostazioni predefinite in fabbrica

Funzione	Valore
Unità di misurazione della pressione sanguigna	mmHg
Tipo di paziente	Paziente adulto
Intervallo misurazione automatica NIBP	15 minuti
PAM (paziente adulto e paziente pediatrico)	Disattivata
PAM (paziente neonatale)	Attivata
Allarme pressione sistolica max. paziente adulto NIBP	220 mmHg
Allarme pressione sistolica min. paziente adulto NIBP	75 mmHg
Allarme pressione diastolica max. paziente adulto NIBP	110 mmHg
Allarme pressione diastolica min. paziente adulto NIBP	35 mmHg
Allarme PAM max. paziente adulto NIBP	120 mmHg
Allarme PAM min. paziente adulto NIBP	50 mmHg
Allarme PAM max. paziente pediatrico NIBP	145 mmHg
Allarme pressione sistolica min. paziente pediatrico NIBP	75 mmHg
Allarme pressione diastolica max. paziente pediatrico NIBP	100 mmHg
Allarme pressione diastolica min. paziente pediatrico NIBP	35 mmHg
Allarme PAM max. paziente pediatrico NIBP	110 mmHg
Allarme PAM min. paziente pediatrico NIBP	50 mmHg
Allarme pressione sistolica max. paziente neonatale NIBP	120 mmHg
Allarme pressione sistolica min. paziente neonatale NIBP	50 mmHg
Allarme pressione diastolica max. paziente neonatale NIBP	70 mmHg
Allarme pressione diastolica min. paziente neonatale NIBP	30 mmHg
Allarme PAM max. paziente neonatale NIBP	80 mmHg
Allarme PAM min. paziente neonatale NIBP	35 mmHg
Allarme max. SpO <sub>2</sub> paziente adulto	---
Allarme min. SpO <sub>2</sub> paziente adulto	85%
Allarme max. SpO <sub>2</sub> paziente pediatrico	---
Allarme min. SpO <sub>2</sub> paziente pediatrico	85%
Allarme max. SpO <sub>2</sub> paziente neonatale	95%
Allarme min. SpO <sub>2</sub> paziente neonatale	80%
Scala temperatura	°F (Fahrenheit predittiva)
Allarme frequenza del polso max. paziente adulto	120 battiti al minuto
Allarme frequenza del polso min. paziente adulto	50 battiti al minuto
Allarme frequenza del polso max. paziente pediatrico	150 battiti al minuto
Allarme frequenza del polso min. paziente pediatrico	50 battiti al minuto
Allarme frequenza del polso max. paziente neonatale	200 battiti al minuto
Allarme frequenza del polso min. paziente neonatale	100 battiti al minuto
Volume segnale dell'impulso	03
Comando stampa	Batch
Visualizzazione ora del giorno	24 ore



# Garanzia

---

Questo prodotto è venduto da Welch Allyn ed è coperto dalle garanzie enunciate nei seguenti paragrafi. Queste garanzie sono estese solo all'utente finale rispetto all'acquisto originale del prodotto come nuovo direttamente da Welch Allyn o dai distributori autorizzati Welch Allyn.

Per due anni (un anno per i monitor sottoposti a "remanufacturing") dalla data della consegna originale all'acquirente, si garantisce che il Vital Signs Monitor 300 Series e il supporto di ricarica/comunicazione per il Vital Signs Monitor 300 Series sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione e conformi nei materiali alla descrizione del prodotto contenuta nelle Istruzioni per l'uso e riportata sulle etichette del prodotto.

Questa garanzia è valida solo alle seguenti condizioni:

- Il prodotto viene utilizzato nel rispetto dei requisiti di sicurezza e normativi, in condizioni tipiche del comune utilizzo;
- Il prodotto è stato configurato, modificato, regolato e riparato esclusivamente da personale Welch Allyn o da persone espressamente autorizzate, nel rispetto delle procedure di servizio, e
- Il prodotto non è stato danneggiato a causa di uso improprio, negligenza o incidente.

Per un periodo di 90 giorni, se non indicato altrimenti, questa stessa garanzia copre gli accessori forniti da Welch Allyn.

Secondo le garanzie enunciate in precedenza, gli obblighi di Welch Allyn e la tutela dell'acquirente si limitano esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita, a discrezione di Welch Allyn, dei prodotti risultanti difettosi durante il periodo di garanzia. I reclami in garanzia devono essere notificati non oltre sette giorni dalla scadenza del periodo di garanzia contattando il numero di telefono dell'assistenza tecnica elencato di seguito per ottenere un codice RMA (returned material authorization number, codice di autorizzazione materiali restituiti) e restituendo quindi il prodotto corredato di documentazione RMA, con le spese di trasporto prepagate, all'indirizzo indicato dall'assistenza clienti Welch Allyn.

Welch Allyn  
8500 S.W. Creekside Place  
Beaverton, Oregon 97008-7107 USA  
Telefono: (503) 530-7500 o (800) 289-2500  
Fax: (503) 526-4200

Welch Allyn non può essere in altro modo ritenuta responsabile di eventuali danni, compresi, in via esemplificativa, danni incidentali, consequenziali o speciali.

Nessuna garanzia espressa o implicita si estende oltre le garanzie enunciate in questo documento. Welch Allyn non fornisce alcuna garanzia di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.



# Indice analitico

---

## A

adulto  
*vedere anche* tipo di paziente  
 definizione, 25  
 icona, 4  
 alimentazione, 11  
 alimentazione in c.a.  
   collegamento, 11  
 allarme  
   impostazione, 58  
   max. e min., 59  
   PAM, 37, 60  
   paziente, 55  
   risposta a, 55  
   segnale, 55  
   valori limite, 60  
 allarme associato al paziente, 55  
 anomalia tecnica, 56  
   risposta a, 56  
 autoclave, 6  
 avvertenze  
   generali, 5  
   NIBP, 31  
   SpO<sub>2</sub>, 40  
   temperatura, 43

## B

batteria  
   avvertenza batteria in esaurimento, 73  
   carica in corso, 11  
   carica prima dell'uso, 12  
   guasto, 73  
   indicatore batteria in esaurimento, 12  
 bracciale  
   posizionamento, 34  
   pressione, predefinita, 32  
   selezione, 33

## C

cancellazione dei dati del paziente, 69  
 carica della batteria, 11

carta, sostituzione, 70  
 Celsius  
   unità, selezione, 28, 44  
 certificazione CE, 2  
 certificazione CSA, 2  
 chiamata infermiere  
   posizione del connettore, 61  
   specifiche, 83  
 classificazione, 75  
 codici guasto, 62  
 collegamenti  
   posizione, 10  
 comandi  
   descrizione, 9  
   riepilogo, 3  
 configurazione, 19  
 conservazione, 71

## D

dati  
   cancellazione, 69  
 dati del paziente, esame, 63  
 dati memorizzati, 63  
 destinazione d'uso, 1

## E

esame, 63

## F

Fahrenheit  
   unità, selezione, 28, 44  
 FDA, 75

## I

impostazione, 11  
 indicatori  
   descrizione, 8  
   riepilogo, 4  
 infusione endovenosa

- avvertenza, 31
- intervallo STAT, 39

## K

- kPa
  - unità, selezione, 27

## L

- limiti programmati, 55

## M

- manutenzione, 71
- Marchi registrati, ii
- messaggio CAL, 35
- messaggio LETTURA, 63
- misurazione
  - dati, esame, 63
  - unità, impostazione, 27
- mmHg
  - unità, selezione, 27
- monitor
  - configurazione, 19
  - impostazione, 19
- monitoraggio
  - frequenza del polso, 39
  - pressione sanguigna, 31
  - SpO2, 40
  - temperatura, 43

## N

- neonatale
  - vedere anche* tipo di paziente
  - definizione, 25
  - icona, 4
- NIBP, 31
  - automatica, 36
  - ciclo, termine, 38
  - manuale, 35
  - preparazione, 32
  - STAT, 39

## P

- PAM
  - allarme, 37, 60
- parametri di funzionamento
  - impostazione, 19
- pediatrico
  - vedere anche* tipo di paziente
  - definizione, 25

- icona, 4
- precauzioni
  - NIBP, 31
  - SpO2, 40
  - temperatura, 43
- pressione sanguigna
  - automatica, 36
  - manuale, 35
  - monitoraggio, 31
- pulizia, 71
- pulsanti
  - descrizione, 9

## S

- segni vitali
  - allarmi, 55
  - frequenza del polso, 39
  - pressione sanguigna, 31
  - SpO2, 40
  - temperatura, 43
- sicurezza
  - avvertenze e precauzioni, 5
- Software
  - Contratto di licenza, ii
- Specifiche
  - Temperatura, 76
- specifiche
  - ambientali, 79
  - batteria, 78
  - chiamata infermiere, 83
  - elettriche, 78
  - fisiche, 77
  - pressione sanguigna, 75
  - prestazionali, 75
- SpO2
  - collegamento cavo, 15
  - misurazione, 40
- stampa a flusso, 30
- stampa batch, 30, 64
- stampa dei dati del paziente, 30
- stampa flusso, 64
- stampante
  - sostituzione carta, 70
  - uscita, 65

## T

- temperatura
  - collegamento cavo sonda, 14
  - funzionamento, monitor, 82
  - monitoraggio, 43
  - parametri, impostazione, 44
- temperatura monitorata, 44, 51
- temperatura per via ascellare, 48

- temperatura per via rettale, 50
- temperatura predittiva, 44
- test automatico all'avvio, 17
- tipo di paziente
  - e attivazione/disattivazione PAM, 39
  - impostazione, 25

## V

- valori predefiniti, 84
- valori predefiniti di fabbrica, 84
- visualizzazioni
  - descrizione, 7
  - riepilogo, 4

